

Solventum™ V.A.C.® Peel and Place bandasje

Opptil 7 dagers bruk 2-minutters påføring^{1,2}

En raskere påføring av V.A.C.® behandling er her. Solventum™ V.A.C.® Peel and Place er den første V.A.C.® bandasjen med opptil 7 dagers brukstid. Alt-i-ett integrert design forenkler påføringen, reduserer tiden og opplæringen som kreves for bandasjeskift, og sikrer jevn og standardisert pleie gjennom hele pasientreisen.

Alt-i-ett design gjør påføringen enkel.

1. 3M™ V.A.C.® Granufoam bandasje

Former seg etter sårbunnen uten behov for ekstra skum, for å gi jevn levering av negativt trykk og effektiv væskehåndtering.

2. Perforert, ikke-adhesiv lag

Gjør det mulig for bandasjen å ligge på omkringliggende hud uten behov for ekstra tildekking, og er utviklet for å redusere risikoen for vevsinnvekst.

3. 3M™ V.A.C.® Dermatac™ film


Hudvennlig silikon-akryl klebeteknologi kan repossisjoneres ved første påføring, gir en tett forsegling over anatomisk utfordrende steder, og kan bidra til å minimere ubehag ved fjerning.

4. Solventum™ SensaT.R.A.C.™ hull

Forhåndskuttet hull for enkel og konsekvent påføring av SensaT.R.A.C.™ pute.

5. Solventum™ SensaT.R.A.C.™

Overvåker og sørger for at ønsket trykk opprettholdes i bandasjen.

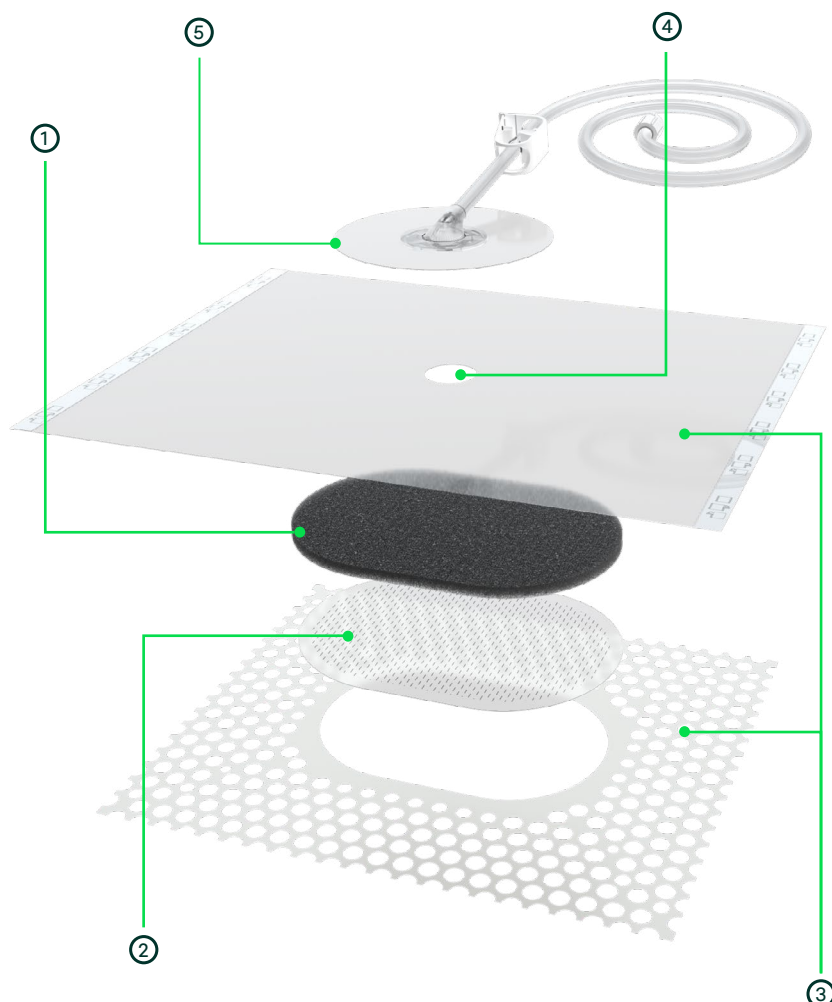

Opptil 7 dagers brukstid

Det perforerte, ikke-adhesive laget muliggjør lengre brukstid og færre bandasjeskift, noe som gir klinikere trygghet i å levere kontinuerlig undertrykksbasert sårbehandling i et beskyttet sårhelingsmiljø. Sammenlignet med 3M sine tradisjonelle NPWT-skumbandasjer har V.A.C.® Peel and Place-bandasjen vist større reduksjon i sår volum og opptil 2,4 ganger økt granuleringstykkelser i en svinemodell med åpne sår.³

Gjennomsnittlig 2-minutters påføring⁴

Den patenterte alt-i-ett-bandasjen gir en enkel og tidsbesparende påføring som krever mindre opplæring. Ved å dekke hele såret og det omkringliggende vevet eliminerer V.A.C.® Peel and Place behovet for å kutte skum. I en simulert brukstest vurderte sykepleiere bandasjen som enklere å bruke enn 3M sine tradisjonelle NPWT-skumbandasjer.⁴ I en kundepreferansetest rapporterte alle 10 av 10 pasienter at fjerning var smertefri.⁵

Konsistent pleie på tvers av situasjoner

Det enkle, allsidige designet av V.A.C.® Peel and Place bandasje er kompatibelt med flere V.A.C.® behandlingsapparater, noe som betyr at behandlingen kan overføres på tvers av pleiesituasjoner—og gir klinikere tillit til at sårbehandling med undertrykk kan opprettholdes effektivt på tvers av ulike pleiesituasjoner.

1. SAT-BSER-05-869347 VAC Peel and Place (Ganymede) BSER. 510(k) K222859.

2. I en simulert brukstest med 12 sykepleiere- og kirurgbrukere. Gjennomsnittlig tid 01:48. SAT-MTF-05-995965 Markedsføringsstudie for Solventum™ V.A.C.® Peel and Place bandasje. 2023.

3. Informasjon inneholdt i utførte dyrestudier har ikke blitt evaluert på mennesker. SAT-MTF-05-982101 Evaluering av V.A.C.® Peel and Place bandasje Konseptet i Full-Thickness Excisional Sår. 2023. Allen D, Robinson T, Schmidt M, Kieswetter K. Preklinisk vurdering av ny lengre-varighet bruk sårbehandling med undertrykk bandasje i en svinemodell. *Wound Rep Reg.* 2013; 31:349-359.

4. I en simulert brukstest med 12 sykepleiere- og kirurgbrukere hvor gjennomsnittlig vurdering var 5,8 av 7 på en 7-punkts Likert skala sammenlignet med Solventum™ tradisjonell NPWT skumbandasje og en separat hybrid akryl og silikondekk hvor gjennomsnittlig vurdering var 4,6 av 7 på en 7-punkts Likert skala (p=0.01, Wilcoxon signert rangert test). SAT-MTF-05-995965 Markedsføringsstudie for Solventum™ V.A.C.® Peel and Place bandasje. 2023.

5. Personundersøkelse (2020); Kundepreferansetest av 10 brukere som gir tilbakemelding om deres erfaring på et sykehus i Chile. Bandasjer ble brukt mellom 4 og 7 dager før fjerning. SAT-DOC-0000052106. 8005 Ganymede Kunde Preferanse Test Post Market Forbruker Undersøkelse Rapport. 2021.

Bruksanvisning

Bruksområder

V.A.C.® Peel and Place bandasje kan brukes på kroniske, akutte, traumatiske, subakutte og rupturerte sår, deltykkelsesforbrenninger, sår (som diabetiske, trykk- eller venøs insuffisiens), flapper og grafts.

V.A.C.® Peel and Place bandasje er ikke egnet for sår som har underminering større enn 2 cm, kanalisering, eller en dybde større enn 6 cm. Vennligst bruk en annen V.A.C.® behandlingsbandasje hvis dette kriteriet ikke er oppfylt.

Les alltid og følg de detaljerte bruksanvisningene sammen med viktig sikkerhetsinformasjon som er inkludert i emballasjen.

Vurderinger

Vurder sårets dimensjoner og dybde for å velge riktig V.A.C.® Peel and Place bandasjestørrelse (se tabellen nedenfor).

Bandasjeskummet bør dekke utover alle sårkantene slik at det når ut på omkringliggende hud. Velg neste størrelse hvis du er usikker på om bandasjen dekker nok.

For avlastning, velg den store størrelsen med det forskyvne SensaT.R.A.C.™ putehullet.

Ikke bruk på sår med:



Bandasjen vil frome seg etter sårbunnen.

Hvis såret strekker seg utover bandasjen, velg en større størrelse

Bandasjen må dekke utover sårkantene.




Applisering



Plasser bandasjen med det forhåndsutskjærte SensaT.R.A.C.™ putehullet vendt opp. Bandasjen trenger minimum 5 cm limkant rundt skummet for å sikre godt feste.

Sjekk

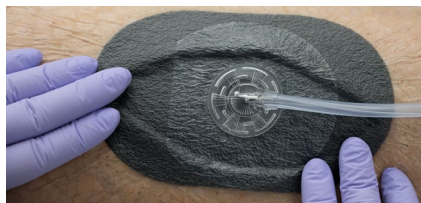

Sjekk den første plasseringen og flytt om nødvendig. Når du er klar, glatt ut eventuelle rynker, trykk ned på overtrekkanten, og fjern håndtakene for å etablere en forsegling.

Koble til



Når bandasjen er klargjort, fjernes beskyttelsesfilmen og SensaT.R.A.C.™ plasseres over åpningen i bandasjen. Slangen kobles deretter til V.A.C.®-pumpen slik at behandlingen kan settes i gang.

Fjerning av bandasjen

Det integrerte designet av V.A.C.® Peel and Place bandasje tillater at bandasjen kan brukes opptil syv dager. Når det er på tide å fjerne eller bytte bandasje, fjern bandasjen forsiktig fra såret, bruk sterilt vann eller normal saltvann hvis bandasjen fester seg til såret.

Bestillings- og instruksjonsinformasjon						
	Produkt navn & SKU	Maksimal sår dybde	Maksimal sår størrelse	Total bandasjestørrelse	Forhåndsutskjært hullplassering	Bandasjer/eske
Solventum™ V.A.C.® Peel and Place bandasje	Liten EZ5SML / 10034913	2 cm eller mindre	6,1 cm x 8,6 cm	16,9 cm x 20,6 cm	Senter	Enhetsmål er en eske med 5 (C05) 5 bandasjer per eske
	Medium EZ5MED / 10034914	4 cm eller mindre	11,1 cm x 16,6 cm	23,7 cm x 29,2 cm	Senter	
	Stor EZ5LRG / 10034915	6 cm eller mindre	13,6 cm x 24,2 cm	26 cm x 35,6 cm	Forskyvvet	

Kompatibel med 3M™ V.A.C.® Ulta behandlingsapparat, 3M™ ActiV.A.C.™ behandlingsapparat og 3M™ V.A.C.® Rx4 behandlingsapparat.

MERK: Spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon eksisterer for disse produktene og behandlingene. Vennligst konsulter en kliniker og produktets bruksanvisning før påføring. Dette materialet er ment for helsepersonell.



← Se bruksanvisningsvideo

Distributed by:



© Solventum 2026. Solventum, S-logoen og andre varemerker er varemerker tilhørende Solventum eller dets tilknyttede selskaper. OMG2240684.

Lær mer om V.A.C.® Peel and Place bandasje på go.solventum.com/VACpeelandplace