



ABSORBERANDE FLEXIBELT ANTIMIKROBIELLT SKUMFÖRBAND


- Snabb och ihållande antimikrobiell effekt
- Minskar smärta och vävnadsskada i såret och på omkringliggande hud
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Mycket formbart och kan enkelt klippas till rätt storlek

Safetac® yta:

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration⁴

Absorberande polyuretanskum:

- Absorberar sårsekret
- Kan användas under kompression
- Formar sig lätt efter kroppens konturer

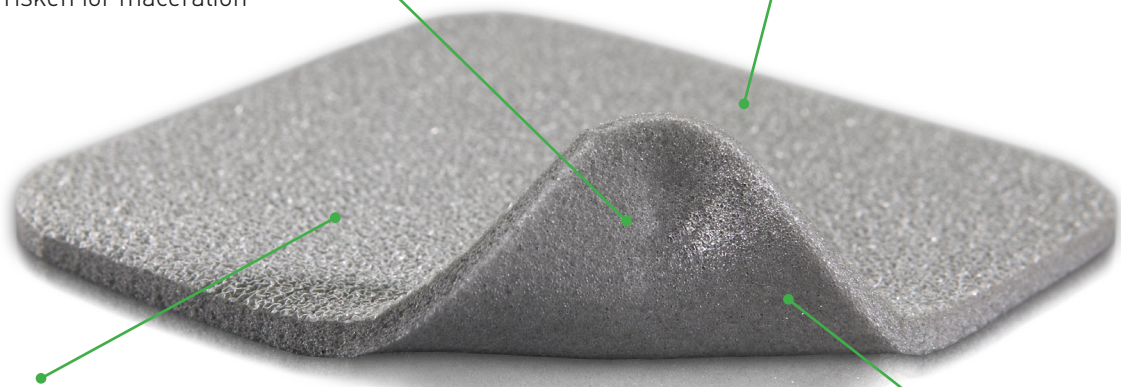

Polyuretanfilm på ovensidan:

- Andningsbar
- Vätsketät
- Skyddar mot virus och bakterier*

Safetac
TECHNOLOGY

Antimikrobiell effekt inom 30 minuter och upp till 7 dagar.³


* mikrober större än 25 nm

Safetac® -teknologi


Safetac® -teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi. Förband med Safetac är skonsamma vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten. Safetac finns exklusivt på Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® och Mepitac® samt andra utvalda förband från Mölnlycke Health Care.

För mer information besök www.safetac.se

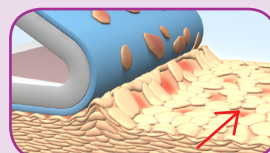


Med traditionellt vidhäftande förband dras hudceller med (hudstrippning) och orsakar smärta och vävnadsskada.

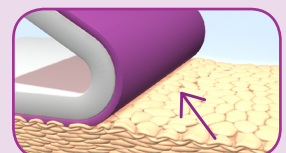


Med Safetac-teknologi dras få eller inga hudceller med (ingen hudstrippning)


Så här används Mepilex® Ag

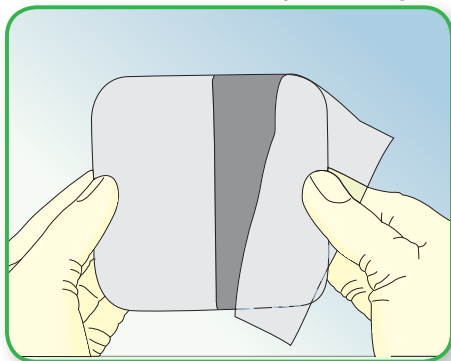

Rengör såret med saltlösning eller vatten enligt gällande kliniska rengöringsrutiner. Torka den omkringliggande huden ordentligt.

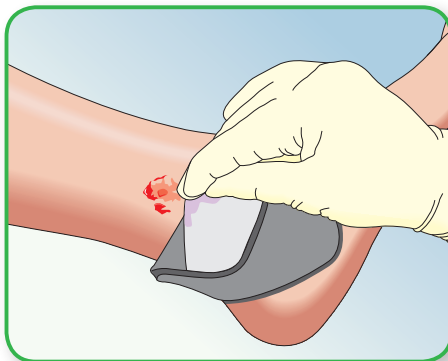

Ta bort skyddsfilm och applicera den vidhäftande sidan på såret. Sträck inte. För bästa resultat bör Mepilex Ag överlappa den omkringliggande huden med åtminstone 2 cm. Mepilex Ag kan klippas till önskad storlek.

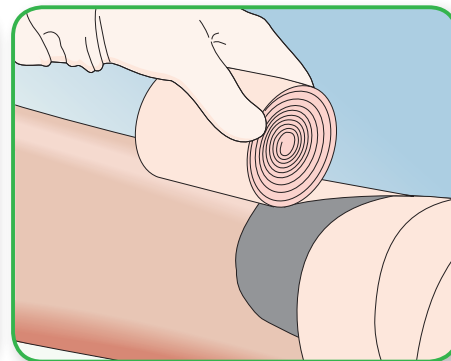

Fixera vid behov Mepilex Ag med ett bandage eller annan fixeringsprodukt t. ex. Tubifast.


Så här fungerar Mepilex Ag

Mepilex Ag är ett mjukt och formbart antimikrobiellt skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sår-läkning. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer inom 30 minuter och har en ihållande effekt i upp till 7 dagar. Genom att minska mängden mikroorganismer i såret kan Mepilex Ag även minska odören.

Fördelar med Mepilex Ag

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

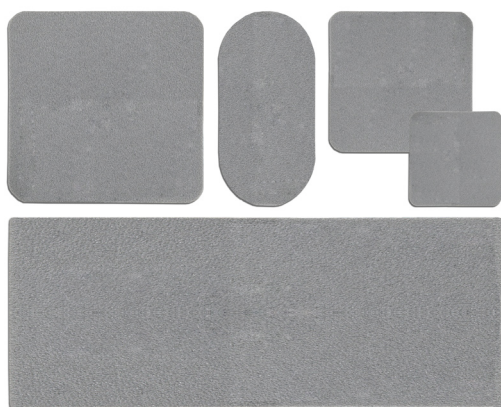

Användningsområden

Mepilex Ag är utvecklat för flera typer av måttligt till rikligt vätskande sår med ökade tecken på bakteriell påverkan, såsom ben- och fotsår, trycksår, maligna sår, delhudsbrännskador, traumatiska och smärtsamma sår. Mepilex Ag kan även användas under kompression.

För mer detaljerad information vänligen se användarinstruktionerna.



MEPILEX® AG levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
287110	10×10	5	70
287210	10×20	5	45
287310	15×15	5	35
287410	20×20	5	25
287510	20×50	5	12

MEPILEX® AG Heel levereras sterila, enstycksförpackade

388100	13×20	5	25
388300	15×22	5	30