


## Bakteriebindande skumförband

### Produktbeskrivning

Skumförband med Sorbacts bakterie- och svampbindande effekt. Förbandet är lämpligt att använda på lätt till måttligt vätskande sår. Sorbact Foam består av acetatväv impregnerad med en fettsyraester (DACC), laminerad på polyuretanskum. Semipermeabel film ytterst. Formbart och tryckavlastande.

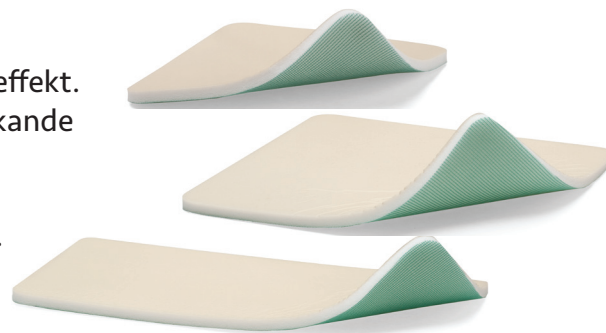

### Bruksanvisning

Lägg förbandet direkt på sårytan med den gröna sidan neråt. Fixera. Observera att den gröna Sorbactväven skall ha direktkontakt med sårytan. Förbandet går bra att klippa i då annan form eller storlek önskas. Om förbandet skall sitta på rundade ytor, t ex hälar eller armbågar, rekommenderas att man klipper flikar i hörnen. Förbandsbyte, beroende på exudatmängd, dagligen till två gånger per vecka.

### Användningsområde

Alla typer av sår där upprensning av mikroorganismer och samtidig vätskehantering önskas t ex:

- Trycksår, bensår, fotsår
- Akuta traumatiska sår
- Postoperativa sår

### Fördelar

- Bakteriekontroll
- Vätskehantering
- Ingen risk för resistensutveckling
- Formbar

Produkt	Varunr	Storlek	Antal förp.
Skumförband	98310	10 x 10 cm	10
Skumförband	98315	15 x 15 cm	10
Skumförband	98320	10 x 20 cm	10