

SÄKERHETSMEKANISM



PRESCRIPTION

PATIENT ACCESS

PREPARATION

APPLICATION

DISCHARGE
MANAGEMENT

B. Braun Sterican[®] Safety Needle

Kanyl med säkerhetsmekanism

B. Braun Sterican® Safety

Kanyl med säkerhetsmekanism

KONTINUERLIGT RISKFÖREBYGGANDE ARBETE

Nålstickskador är den vanligaste stickskadan i det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården. Även om riskerna är allmänt kända är de fortfarande orsak till en stor del av de blodsmittor som överförs i samband med stickskador.

Nyligen utförda studier gällande stickskador visar på att olika faktorer kan ha en negativ påverkan på en säker hantering, även efter användning, när injektionen är utförd. Således för EU-direktivet 2010/32/EU ett ramverk för att uppnå säkrast möjliga arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.


Sterican® Safety säkerhetsfunktion överensstämmer med EU-direktivet och erbjuder ett integrerat kanylskydd som lätt aktiveras med en enhandsteknik. Kanylen säkras och skyddas inuti kanylskyddet och går därefter inte att reaktiveras.

Sterican® Safety Instruktion



Säker låsning

- Visuellt och hörbar återkoppling ges när kanylskyddet aktiveras och bekräftar att kanylen är säkrad.

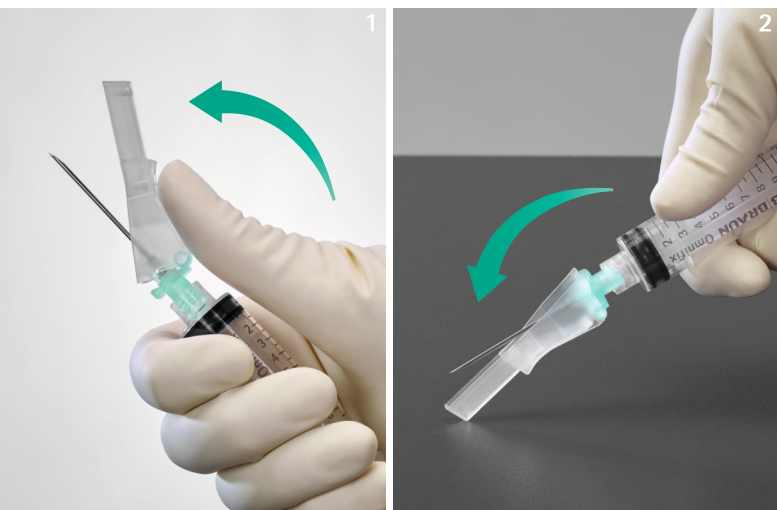

Två sätt att aktivera säkerhetsmekanismen

1 Aktivering med enhandsgrepp. Sätt tumme och pekfinger på den räfflade delen på kanylskyddet. För fram kanylskyddet över kanylen tills ett snäpp känns och ett hörbart klick hörs.

2 Aktivera säkerhetsmekanismen genom att pressa kanylskyddet mot en hård och plan yta tills ett hörbart klick hörs.



Kanylskyddet som integrerad del av produkten

- Säkerställer att kanylskyddet och kanylen håller samman under hela användningen.



Uppåtriktad position

- Uppåtriktad position av nålsögat i förhållande till kanylskyddet.



Säkerhetsmekanism

- Kanylskydd för att säkra kanylen efter användning.



Lätt att aktivera

- Aktivera kanylskyddet med enhandgrepp: Säkerställer att handen är bakom kanylspetsen.
- Grepplatta för en lätt aktivering: Ingen ändring av stickteknik utan tillåter samma stickteknik som med standard kanyl.



Flexibel led

- Möjliggör enkel justering av säkerhetsmekanismen under användning.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Finns i storlekarna G30-G18
- Kompatibel med alla standard Luer & Luerlock sprutor
- Kanyl: Rostfritt stål
- Kanylhubb: Polypropylene
- I enlighet med EU-direktiv 2010/32/EU
- Färgkodad i enlighet med IOS 6009

Sterican® Safety		Ytterdiam \varnothing	Kanyllängd	Storlek	Units	Art.nr.
Storlek (G)	mm	mm	inch	säkerhetsmek.		
30	0.30	13	½	kort	100	4670002S-01
27	0.40	13	½	kort	100	4670005S-01
26	0.45	13	½	kort	100	4670008S-01
25	0.50	16	5/6	kort	100	4670012S-01
25	0.50	25	1	lång	100	4670016S-01
25	0.50	40	1 ½	lång	100	4670020S-01
24	0.55	25	1	lång	100	4670022S-01
23	0.60	25	1	lång	100	4670025S-01
23	0.60	30	1 ¼	lång	100	4670027S-01
23	0.60	40	1 ½	lång	100	4670028S-01
22	0.70	25	1	lång	100	4670030S-01
22	0.70	30	1 ¼	lång	100	4670032S-01
22	0.70	40	1 ½	lång	100	4670035S-01
21	0.80	25	1	lång	100	4670040S-01
21	0.80	30	1 ¼	lång	100	4670042S-01
21	0.80	40	1 ½	lång	100	4670045S-01
20	0.90	25	1	lång	100	4670047S-01
20	0.90	40	1 ½	lång	100	4670050S-01
19	1.10	40	1 ½	lång	100	4670052S-01
18	1.20	25	1	lång	100	4670053S-01
18	1.20	40	1 ½	lång	100	4670055S-01



B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 Danderyd | Sverige
 Tel. +46 (0)8 634 34 00 | www.bbraun.se



WWW.SAFEINFUSIONTHERAPY.COM

Redigerad: 07.2018