




Cystofix®

SUPRAPUBISK KATETERISERING

System färdigt att använda:

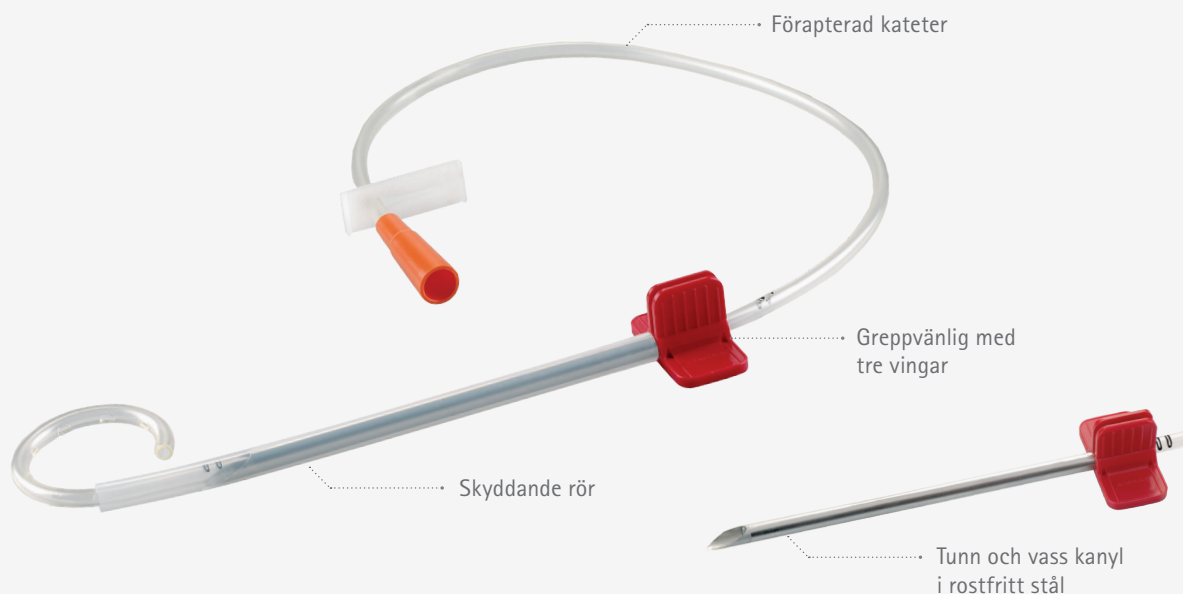

System färdigt att använda:

Katetern sitter redan på plats inne i kanylen


- Sparar tid
Det skyddande röret kan vara på plats fram till användning.
- Förhöjer säkerheten och minskar risken för stickskador

Suprapubisk kateterisering i syfte att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion


"There is a lower rate of infection in those with a suprapubic rather than urethral catheters despite the former being used for two weeks or longer"

EAUN guideline 2012. Evidence-based Guidelines for Best Practice in urological health care. Catheterisation. Indwelling catheters in adults. Urethral and suprapubic. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sánchez M, Pearce I, Schwennesen T, Vahr S, Vandewinkel C.


System färdigt att använda:

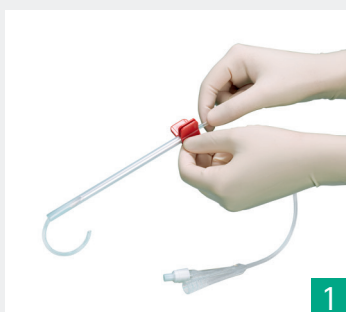

Katetern sitter redan i kanylen. Behåll det skyddande röret på kanylen.

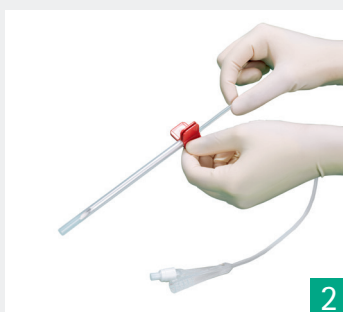


Dra katetern tills toppen är precis under kanylens avfasning.

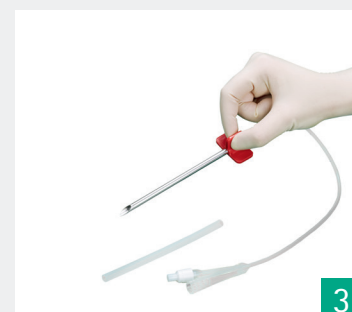

Ta bort det skyddande röret för att börja punktionen.

Standard i suprapubisk kateterisering

Silikonkateter med integrerad ballong:

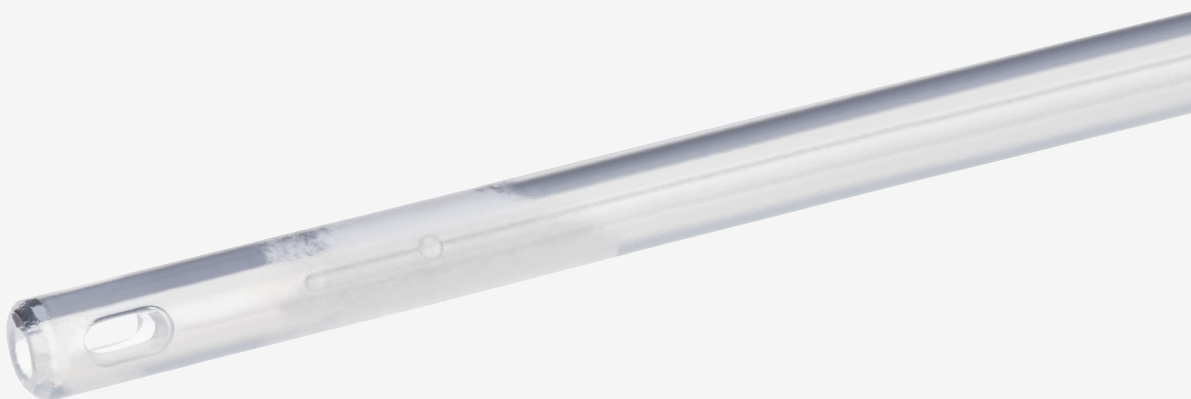


Lågprofilballong:

- Utformad för enkelt uttag och reducerad cuffing-effekt.¹
- Utformad för enkel införsel vid återplacering av katetern (ingen krage)

Silikonmaterial:

- Kan återplaceras upprepande och är lämplig för långtidsbärande²

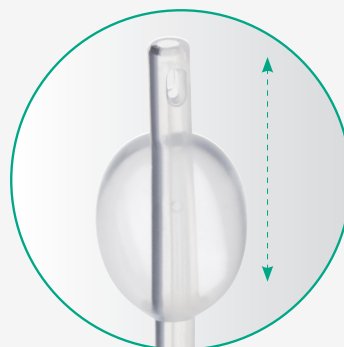

Kort spets för ökad patientkomfort³



(1) Br. J. of Community Nurs, 2005 Oct; 10 (10) : 461-464, Suprapubic Catheterization: Challenges in changing catheters. Robinson J.
(2) 5th International Consultation on Incontinence, Paris 2012. Committee 20: 1519-1642, Management using continence products

(3) B. Braun technical files

Punktionsset med ballong för all användning inom suprapubisk kateterisering. Cystofix® färdig att använda.

Kateterdesign	Kateter-material	Nål-längd	Nål-diameter	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Ballong rak spets integrerad ballong Färdig att använda	Silikon	12cm	5,4mm	□ CH12	40cm	10	4450200	
		12cm	5,4mm	■ CH14	40cm	10	4450220	

Punktionsset med pigtail för korttidsbruk. Rekommenderad inliggandetid: upp till 14 dagar

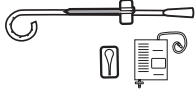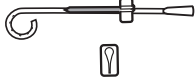Kateterdesign	Kateter-material	Nål-längd	Nål-diameter	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Komplett set med 2L-urinpåse Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450150	
		12cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450160	
		12cm	5,4mm	■ CH15	65cm	10	4450170	
Eco set (ingen påse) Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450100	
		12cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450120	
		12cm	5,4mm	■ CH15	65cm	10	4450130	

Utbytesset kateter med integrerad ballong. Rekommenderad inliggandetid: 30 dagar

Setdesign	Kateter-design	Kateter-material	Kateter-storlek	Kateter-längd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Utbytesset med ledare	Ballong rak spets	Silikon	■ CH10	40cm	5	4450010	
			□ CH12			4450012	
			■ CH14			4450014	
			■ CH16			4450016	

Troakarens material är rostfritt stål och ABS.