


Klinion® Förfylld spruta NaCl 0,9%

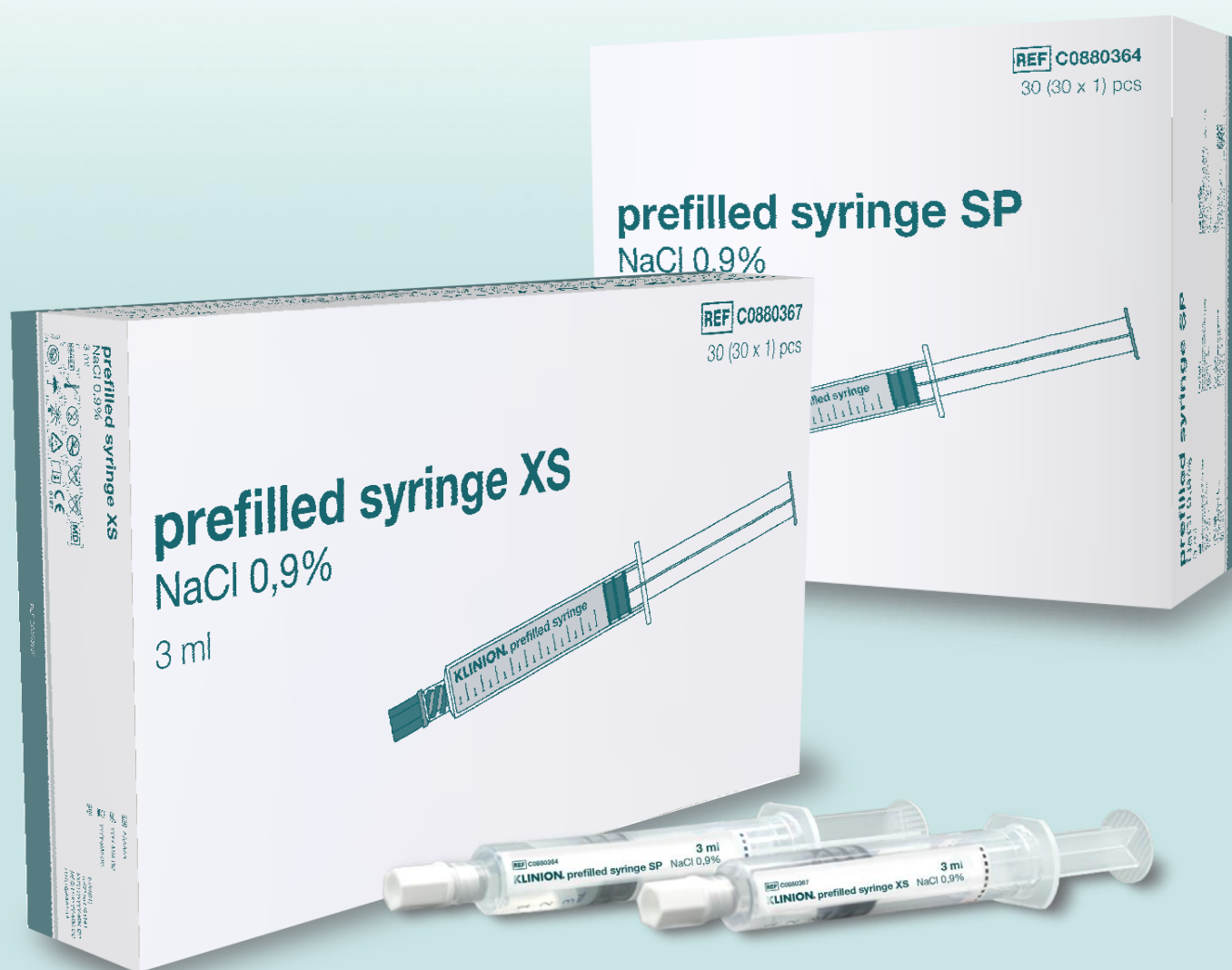

Tryggt · Enkelt · Effektivt

Klinion® Förfylld spruta NaCl 0,9%

Klinion® är ett välkänt nederländskt varumärke med över 100 års erfarenhet av att utveckla produkter för hälso- och sjukvården. Det breda sortimentet omfattar lösningar inom bland annat sårvård, infusion och andra viktiga medicinska områden, och erbjuder pålitligt stöd till vårdpersonal världen över. Varje dag arbetar Klinion® för att göra det enklare att ge god och säker vård genom att kombinera funktionalitet, hög kvalitet och kostnadseffektiva lösningar.

Klinions® förfyllda saltlösningssprutor för spolning av vaskulära infarter är färdiga att använda och bidrar till ökad patientsäkerhet.¹ Sprutorna är utformade för att uppfylla höga krav på sterilitet, användarvänlighet och kvalitet, vilket gör dem till ett tillförlitligt val för effektiv och säker hantering av intravenösa infarter.

Indikationer

Klinion® förfyllda sprutor med 0,9 % natriumklorid (NaCl) är avsedda för spolning och underhåll av kompatibla vaskulära infarter samt intravenösa infusionssystem. Endast för spolning. Fri från naturgummilatex och DEHP.

Tryggt · Enkelt · Effektivt



Refluxfri design Minskar risken för oklusion i katetern och bidrar till en säker och effektiv intravenös behandling.



Integrerat nålfritt system Bidrar till att bibehålla en öppen och fungerande vaskulär infart samtidigt som risken för nålsticksskador minskar.



Extern sterilisering (xs-varianter) Anpassad för användning i sterila miljöer och bidrar till säker hantering vid aseptiska procedurer, vilket stödjer en hög nivå av patientsäkerhet.



Utvecklad med säkerhet i åtanke Fri från naturgummilatex, DEHP och PVC och utformad för att stödja en säker och trygg patientvård.



Praktisk design Enkelt skruvbart spetslock som bidrar till säker hantering och minskar risken för oavsiktlig kontaminering.




Högsta kvalitet inom regelverket Klassificerad som medicinteknisk produkt i MDR klass IIa och tillverkad i enlighet med relevanta ISO-standarder.

¹ Lee PT, Terry J. Övergång till användning av förfyllda sprutor för spolning av intravenösa kanyler. Br J Nurs. 22 juli 2021;30(14):S14-S22. doi: 10.12968/bjon.2021.30.14.S14. PMID: 34288752

Användningsanvisning

Efter administrering av läkemedel via en vaskulär infart ska kompatibilitet med 0,9 % natriumkloridlösning kontrolleras enligt läkemedelstillverkarens bruksanvisning innan spolning utförs. Om läkemedlet inte är kompatibelt med 0,9 % natriumklorid ska läkemedelstillverkarens anvisningar för spolning följas. Alternativt kan infarten först spolad med en kompatibel lösning för att avlägsna eventuella läkemedelsrester, följt av spolning med 0,9 % natriumkloridlösning som låslösning.

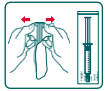

Öppna förpackningen och ta ut sprutan. Placera sprutan på ett sterilt underlag (gäller endast Klinion förfyllda sprutor med 0,9 % NaCl XS).



Låt Luer-Lock-locket sitta kvar på sprutan och tryck till kolven för att bryta tätningen mellan kolven och sprutcyllindern.



Skruva av sprutlocket och undvik att vidröra sprutans Luer-anslutning för att bibehålla steriliteten.



Håll sprutan upprätt och tryck försiktigt på kolven för att avlägsna luft ur sprutan.



Anslut sprutan till injektionsporten via Luer-kopplingen och spola enligt lokala riktlinjer och rutiner. Om kraftigt motstånd uppstår vid spolning ska överdriven kraft inte användas. En långsam administreringshastighet rekommenderas för att minimera eventuell smakupplevelse hos patienten.



Kassera sprutan efter användning i enlighet med lokala rutiner för avfallshantering.

Beställningsinformation

REF	Artikelnummer	Produkt beskrivning	Avdelningsförpackning
C0880364	10035216	Klinion 3 ml Förfylldspruta NaCl Singel steril SP	30
C0880365	10035217	Klinion 5 ml Förfylldspruta NaCl Singel steril SP	30
C0880366	10035218	Klinion 10 ml Förfylldspruta NaCl Singel steril SP	30
C0880367	10035219	Klinion 3 ml Förfylldspruta NaCl dubbel steril XS	30
C0880368	10035220	Klinion 5 ml Förfylldspruta NaCl dubbel steril XS	30
C0880369	10035221	Klinion 10 ml Förfylldspruta NaCl dubbel steril XS	30

