



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



## Freka® Trelumina, ENFit

Trippellumensond för endoskopisk- eller röntgen-  
placering i tunntarm och ventrikel som möjliggör för  
nutritionstillförsel i tunntarm och samtidigt dränage  
från ventrikeln

ENFit-koppling

---

Röntgentät för förbättrad synlighet på  
röntgen


---

Teflonbelagd ledare för smidig  
sondsättning och bortagande

---

# Freka® Trelumina, ENFit

Transnasal, trippellumensond med teflonbelagd spiralmandrin och säker enteral koppling ENFit, enligt säkerhetsstandarden ISO 80369-3.

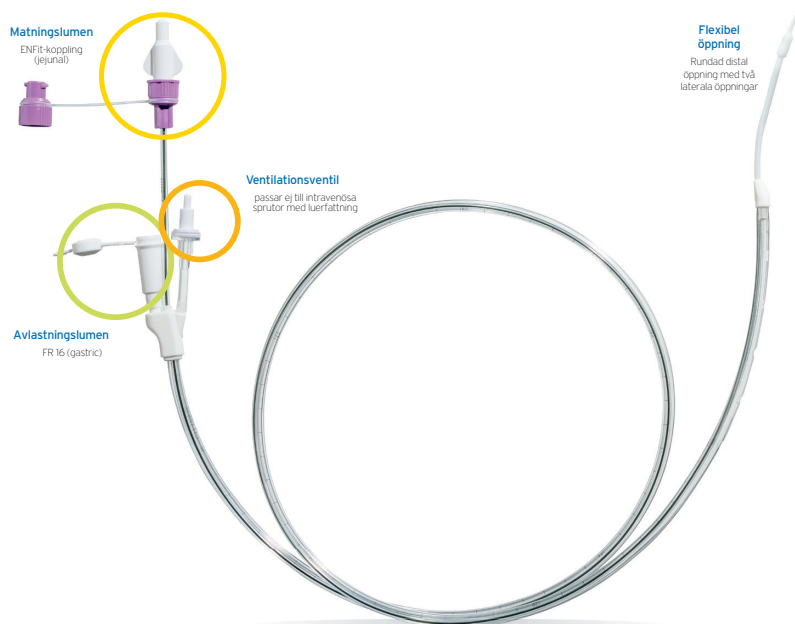

**Nutritionstillförsel:**  
Tidig jejunal nutrition

## Diagnostisk:

Analys av maginnehåll, bestämning av magsinnehållets pH-nivå, tidig diagnos och behandling av gastrisk blödning



**Övervakning:**  
Aspirationsprofylax, kontroll av magblödning

## Ventilationsventil:

Förhindrar fastsugning i magslemhinnan, ingen sondocklusion, inga mikrolesjoner



## Terapi:

Gastrisk och jejunal medicinering, dränering och neutralisering av gastriskt innehåll, sköljning vid magblödning

## Gastriskt dekompression:

Effektiv dränering av maginnehåll genom stora dräneringsöppningar

## Egenskaper:

- Trippellumensond för endoskopisk- eller röntgenplacering i tunntarm och ventrikel som möjliggör för nutritionstillförsel i tunntarm och samtidigt dränering från ventrikeln
- Säker enteral ENFit-koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3 för en säker och tätslutande anslutning
- Röntgentät för förbättrad synlighet på röntgen
- Teflonbelagd ledare för smidigt borttagande och minimal påverkan av sondens läge
- Lägeskontroll med kontrastmedel av sonden med ledaren kvar i sonden (ENFit)
- Lägesmarkeringar varje cm vilket möjliggör för kontroll av läge och underlättar vid sondsättning.
- Rundad distal öppning på gastrosonden med fem laterala öppningar, rundad distal öppning på intestinalsonden med två laterala öppningar, för att garantera bra flödes hastighet och minimera risk för stopp i sonden
- Ventilationsventilen passar ej till intravenösa sprutor med luerfattning
- Sondens är tillverkad i väpnadsvänlig polyuretan. Fri från PVC, latex och Bisfenol A
- Omplaceringsskateter PVC (mjukgörare DEHP)
- Sterilförpackad (EO)
- Användningstid upp till 4 veckor

## Förpackningen innehåller:

- Jejunal/Gastral sond
- Freka ledare
- Fixeringstejp
- MCT-olja
- Freka Connect ENFit ProNeo 10 ml
- Adapter ENFit Female Oral/LL
- Re-routing kateter (blå)



Freka® Trelumina	Koppling	Yttre ø	Inre ø	Längd
Intestinal matningslumen	ENFit	2,9 mm	1,9 mm	150 cm
Gastrisk dekompressionslumen	Trätt, Luer inkompatibel	5,3 mm	4,1 mm	95 cm
Gastrisk luftningskanal	Luer-inkompatibel	-	1,2 mm	95 cm

## BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. Leverantör
Freka Trelumina ENFit	1x5 st	825201	7981834



**FRESENIUS KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi AB  
Tel: 020-116 68 44  
kundservice@fresenius-kabi.com  
fresenius-kabi.se

Ordermottagning Tamro:  
tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com  
För produktinformation, vänligen kontakta  
Fresenius Kabis medicinska information.