

Skonsam sårbehandling



DuoDERM[®] Hydrogel[™] är en vattenbaserad gel som innehåller pektin, natriumcarboxymetylcellulosa samt propylenglykol. DuoDERM Hydrogel bidrar till en gynnsam sår läkningsmiljö genom sin förmåga att absorbera sår vätska och skapa fuktighet i såret.

En fuktig sår läkningsmiljö stödjer och underlättar kroppens naturliga upprensningsmekanismer av febrin och nekros – autolytisk debridering. DuoDERM Hydrogel kan också användas vid behandling av infekterade sår* och sår hos diabetiker under överinseende av behörig sjukvårdspersonal. Gelen är förpackad i engångstube med praktisk sterilförpackad applikator för enkel och exakt dosering av gel i såret.

** Som en del av den totala behandlingen av infekterade sår.*

FAKTA

DuoDERM Hydrogel

DuoDERM Hydrogel är en klar, tunnflytande och steril gel bestående av hydrokolloider (pektin och natriumkarboxymetylcellulosa) och propylenglycol. Gelen skapar en fuktig såråkningsmiljö som stödjer och underlättar kroppens naturliga upprepningsmekanismer av febrin och nekros - autolytisk debridering.

INDIKATIONER

DuoDERM Hydrogel är speciellt utvecklad för behandling av torra ytliga och djupa sår såsom bensår och trycksår. Kan också användas vid behandling av infekterade sår* eller sår hos diabetiker under överinseende av behörig sjukvårdspersonal.

BYTESINTERVALL

Rekommenderad bytesintervall av DuoDERM Hydrogel är maximalt tre dagar vid behandling av fibrinbelagda och nekrotiska sår. Rena och granulerande sår kan behandlas med upp till sju dagars bytesintervall.

FÖRVARING / HÅLLBARHET

Förvaras i rumstemperatur, Undvik frysning. Hållbarhet i 2 år.

STERILISERINGSMETOD


Tuben är autoklavsteriliserad. Applikatorn är steriliserad med etylenoxid.

KLASSIFICERING


DuoDERM Hydrogel är CE-märkt och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För handhavande och information se bruksanvisning i produktkartongen.

* Som en del i den totala behandlingen av infekterade sår.

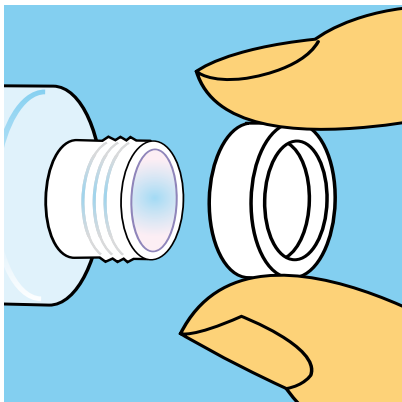

Skruva av hatten på tuben. Avlägsna den vita säkringsringen.

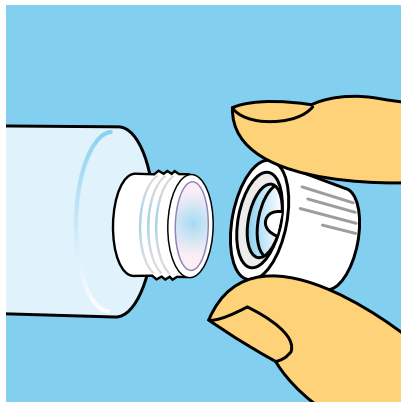


Skruva på hatten på tuben så att tubmembranet perforeras.

DuoDERM® "originalt" bland hydrokolloida förband

DuoDERM® Hydrogel™ innehåller hydrokolloider vilket inte bara ger ökad fuktighet utan också har en absorberande effekt på exudat. DuoDERM Hydrogel är effektiv, lätt att använda och komfortabel. Patienten upplever ofta gelen som smärtlindrande.

Applicera gelen direkt i såret. Fyll ej såret mer än till sårkant. En optimal sårbehandling skapas genom att täcka såret med ett fuktighetsbevarande förband såsom en DuoDERM-platta. Gelen kan lätt sköljas ur såret.

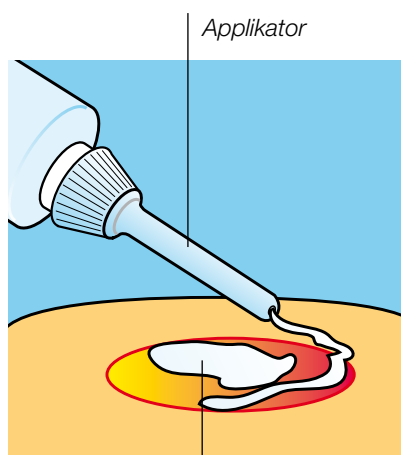

Applikator

Genomskinlig, klar gel med behaglig konsistens

DuoDERM Hydrogel

Storlek
Tub à 15 gram

Förp.
10 st

Varunummer
842997



 **ConvaTec**
A Bristo-Myers Squibb Company

ConvaTec, Box 15200, 167 15 Bromma.
Kundservice: 020-21 22 22.
Fax: 08-704 89 98.
www.convatec.se
convatec.kundservice@bms.com