

Backventil R-LOCK



R-LOCK backventil för säker parallellinfusion och enklare infusionsterapi

Vår unika backventil, R-LOCK är tillverkad för att förhindra backflöde vid parallellinfusioner. Minimal begränsning i flöde. Standardiserade kopplingar innebär att den kan anslutas på alla typer av infartsvägar. Finns även som fast monterad/inbyggd i infusionsaggregat samt i sprutpumpsslang.

Säkerhet

Ger en säker anslutning via Luer-Lock till infusionskanyler, venkatetrar, 3-vägskranar. Förhindrar backflöde, eliminerar risken för stopp i kanyl/kateter, förhindrar reflux vid injektion av läkemedel. Patienten får hela dosen vid injektionstillfället. R-LOCKEN öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde. Om pump används larmar denna omedelbart vid parallell dropp med pumpaggregat/standardaggregat


Vid parenterala nutrioner eller vid administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan R-LOCK användas i upp till 72 timmar.

Uppfyller enligt DIN standard 58362, 2,0 bar.

CODAN's produkter är tillverkade i Europa.

- En säker förbindelse

Backventil R-LOCK

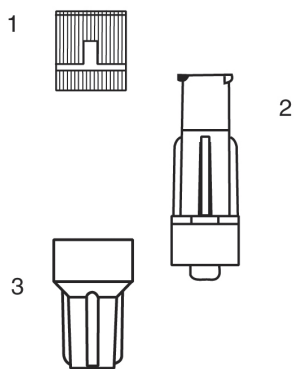

1. Förslutningskork
2. Refluxventil
3. Skyddshätta

Jämn dropptakt

- Möjlighet att infundera dropp i olika kombinationer
- pumpaggregat/standardaggregat
 - standardaggregat/standardaggregat

Oberoende av om det är infusionbehållare av plast eller flaska

Materialspecifikation

Skyddshuv: Polyetylen

Refluxventil: Silikon

Konnektor: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Förslutningskork: Polypropylen

Volym: 0,15 ml

Förpackning: Steril peel-pack

Steriliseringmetod

Etylenoxid

EN standard

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
165250	R-LOCK backventil R-LOCK backventil	150	2400	57600	J	J	S	NEJ