


Produktfaktblad TENA Flex

Användningsområde

TENA Flex är ett mycket läckagesäkert och bekvämt bälteskydd framförallt för vårdtagare som behöver hjälp vid byte. Finns i fem absorptionsnivåer och i fyra storlekar: Small, Medium, Large och Extra Large, vilket möjliggör individuell utprovning.

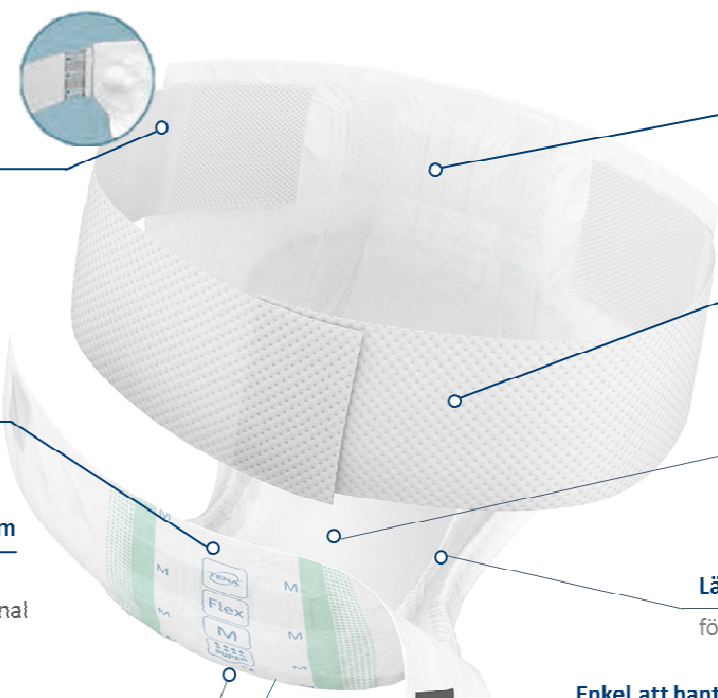

Unikt elastiskt bälte ComfiStretch

som expanderar och går tillbaka i harmoni med kroppens form vid stående, sittande och liggande position

Hög elastik i ryggen

för bästa passform i rygglutet

Höftbältet är stabilt och mjukt

det rullar inte ihop sig utan sitter bekvämt under användning

Spridningsskikt FeelDry™

kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Midjeelastik fram

för hög elasticitet och en säker passform¹

Kan fixeras både bak och fram

ger en ergonomisk arbetsställning för vårdpersonal och ökad värdighet för den enskilde.

Läckagebarriär

för hög säkerhet

Enkel att hantera

Fixeras med kardborre direkt på bältet. Kan enkelt justeras och återförslutas flera gånger

Diskret vätindikator

Odour Neutralizer


för neutraliserande effekt på oönskad lukt

Användarinstruktion på skydd och förpackning

Underlättar fixering för vårdpersonal



TENA Flex absorberar lika bra från båda håll tack vare en symmetrisk formad kärna

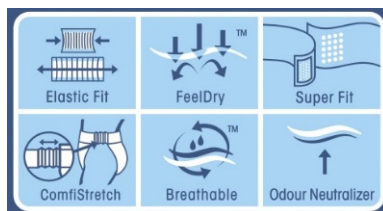

TENA Flex

Tillsammans gör vi skillnad

¹ TENA Flex i storlek XL har en extra kardborre istället för midjeelastik framtill, för extra säker passform

★ Patent applications filed: WO 02/05739, WO 99/37263, WO 95/13772, WO 02/24135, WO2008/039112, WO 03/017902, WO 94/26222, WO 2007/149017, WO 2009/059634, WO 2010/016793.

Produktfaktblad TENA Flex

Produktegenskaper

TENA Flex har ett unikt elastiskt höftbälte (ComfiStretch™) som tillsammans med midjeelastik både fram¹ och bak gör att produkten har hög elasticitet och bibehåller sin säkra passform under hela användningstiden, även vid lägesförändring. Höftbältet är stabilt, komfortabelt och mjukt, vilket gör att det bibehåller sin form under användning och rullar inte ihop sig utan sitter bekvämt för att undvika hudirritation. Bältet går att förlängas med TENA Flex förlängningsbälte om längden behöver justeras.

TENA Flex är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Produktens kroppsnära passform, benelastik och mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer med dubbla elastiktrådar hjälper till att förhindra läckage.

TENA Flex är ett mycket komfortabelt och hudvänligt skydd. Skyddet har en luftig anatomisk design och textilliknande andningsbara material för hög komfort och god hudhälsa. Fixeras med kardborre direkt på bältet. Skyddet kan enkelt justeras och återförslutas flera gånger.

TENA Flex är ett mycket diskret skydd. Den mycket goda passformen minskar risken för att skyddet är synligt utanpå kläderna. Samtliga TENA Flex har Odour Neutralizer, d v s är försedda med superabsorbenter som kapslar in urin och har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt.

Användarinstruktion

Byte stående



Byte liggande



TENA Flex

¹ TENA Flex i storlek XL har en extra kardborre istället för midjeelastik framtill, för extra säker passform

Produktfaktablad TENA Flex

TENA Flex										
Uppsugningsnivå / storlek	Midja/höft (cm)	Längd (cm)	Vikt (g)	Lår (cm)	Antal/påse (st)	Antal/kart. (st)	Antal Kart. (halvpall)	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptionskapacitet	Art. Nr
Normal										
Medium	70-105	80	65	≤ 84	34	102	16	Ja	1335	72 22 34
Large	85-120	86	73	≤ 99	34	102	16	Ja	1474	72 23 34
Plus										
Small	60-90	71	70	≤ 72	30	90	16	Ja	1542	72 31 30
Medium	70-105	80	81	≤ 84	30	90	16	Ja	1811	72 32 30
Large	85-120	86	95	≤ 99	30	90	16	Ja	2044	72 33 30
X-large	105-155	103	120	≤ 116	30	90	12	Ja	2541	72 34 30
Super										
Small	60-90	71	83	≤ 72	30	90	16	Ja	1838	72 41 30
Medium	70-105	80	93	≤ 84	30	90	16	Ja	2250	72 42 30
Large	85-120	86	103	≤ 99	30	90	16	Ja	2492	72 43 30
X-Large	105-155	103	140	≤ 116	30	90	12	Ja	3296	72 44 30
Maxi										
Small	60-90	71	112	≤ 72	22	66	16	Ja	2764	72 51 22
Medium	70-105	80	120	≤ 84	22	66	16	Ja	3060	72 52 22
Large	85-120	86	143	≤ 99	22	66	16	Ja	3455	72 53 22
X-Large	105-155	103	193	≤ 116	21	63	12	Ja	4735	72 54 21
Ultima										
Small	60-90	71	127	≤ 72	20	60	16	Ja	3202	72 51 30
Medium	70-105	80	144	≤ 84	20	60	16	Ja	3576	72 52 20
Large	85-120	86	170	≤ 99	20	60	16	Ja	4324	72 53 20
X-Large	105-155	103	219	≤ 116	17	51	12	Ja	5112	72 54 00



Produktfaktblad TENA Flex

Ingående material

YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: Polyethylene, High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

ABSORBTIONSKÄRNA, övre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

ABSORBTIONSKÄRNA, undre

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

HÖFTBÄLTE

Material: Non-woven

Funktion: Fixeringsytta för kardborrband från skyddet, mjukt för huden, luftgenomsläppligt

ELASTIK I HÖFTBÄLTE

Material: SBS och Non-woven

Funktion: Följa kroppens rörelser och hålla skyddet på plats, bekvämlighet

MIDJEELASTIK

Material: Polyeten och SBS

Funktion: Hålla skyddet på plats, bekvämlighet

BEN ELASTIK

Material: Syntetiska polyeter-polyuretrantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

BARRIÄRELASTIK

Material: Elastan

Funktion: Förhindra sidoläckage av urin och faeces

För samtliga TENA Flex skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

