

Discofix® C

Unik trevägskran för ökad säkerhet



Står emot sprickbildning

Kompromissa aldrig

Spänningsprickor i trevägskranar – ett problem som kan leda till mycket allvarliga komplikationer

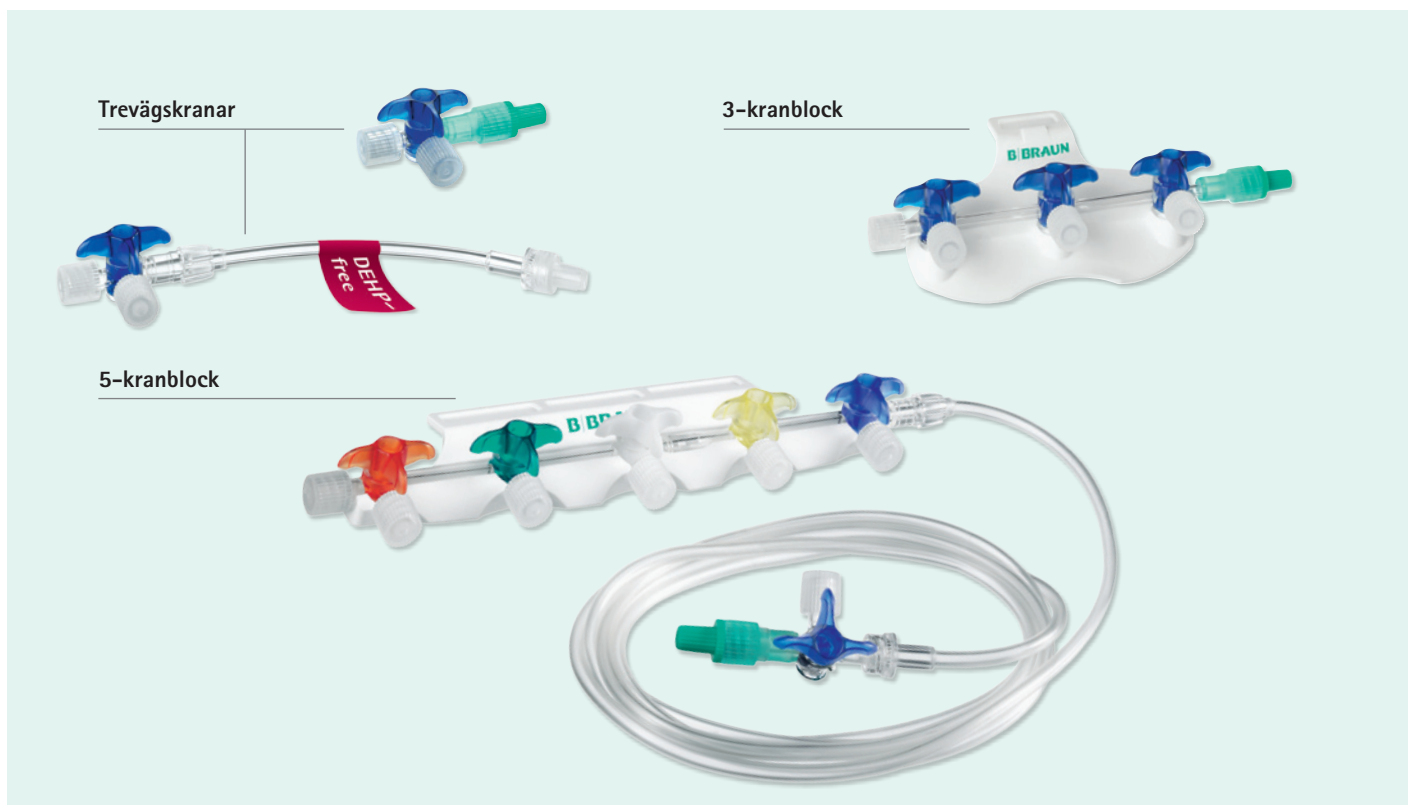
Trevägskranar, en absolut nödvändig komponent i infusionssystem, spelar en central roll i komplexa behandlingsregimer. Starkt koncentrerade och effektiva läkemedel är lika nödvändiga i avancerade terapier.

Potenta läkemedel, som narkosmedel, cytostatika, antibiotika, hypnotika och immunhämmande medel kan i kombination med frekvent hantering belasta kranen så hårt att allvarlig skada uppstår. Fettemulsioner och desinfektionsrutiner kan också påskynda sprickbildning. Till de potentiella konsekvenserna hör läckage, kontamination och – än värre – luftemboli.

Detta innebär risker för både sjukvårdspersonalen och patienterna och utgör en ständig källa till osäkerhet som kräver kontinuerliga säkerhetskontroller.

Lös problemet med kranen som tål de skadliga effekterna av läkemedel och står emot sprickbildning.


Kompromissa aldrig om säkerheten.



Utformad för din säkerhet


Discofix® C – lika lätt att hantera som den är säker

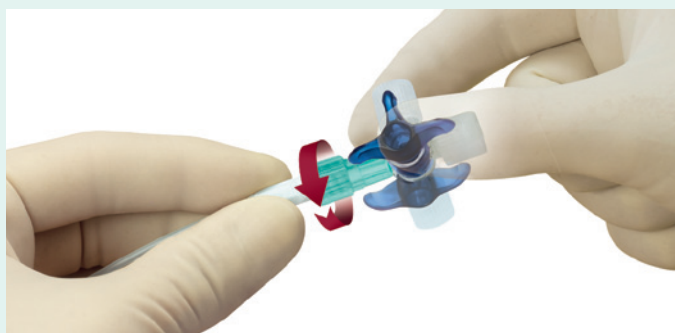Oavsett om kranen ansluts till en perifer venkanyl eller central venkateter, eller ingår i ett infusionssystem, är det viktigt att alla anslutningar och justeringar kan göras snabbt och enkelt. När du hanterar kranen måste du kunna lita på att anslutningarna är säkra och läckagefria. Discofix® C är utformad med hänsyn till alla dessa aspekter.



Lätt att komma åt

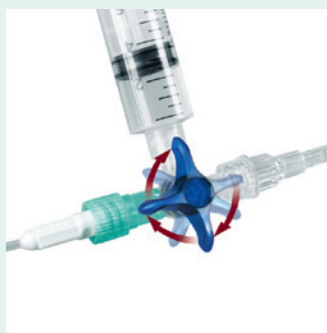Den roterande luer-lockfattningen möjliggör snabb och enkel anslutning och garanterar ett tillförlitligt hopkopplat system. När Discofix® C sitter på plats kan kranen fortfarande rotera kring sin egen axel. Med denna unika funktion underlättas särskilt injektion och aspiration eftersom du kan vrida kranöppningen mot dig när du ansluter en spruta eller andra intravenösa slangar. Oavsiktlig särkoppling hindras.



Du känner kranens läge

Vid varje 45° vridning av kranen känner du ett lätt snäpp. Denna taktila respons talar om för dig när kranen står i rätt läge och hjälper dig att snabbt och enkelt att göra exakta inställningar.



Säker och bekvämare åtkomst

När du har anslutit Discofix® C med förlängningsslang till en perifer venkanyl, central venkateter eller annan intravenös slang gör den roterande luer-lockfattningen det möjligt att säkert och bekvämt vrida kranöppningen mot dig utan att vrida slangen.

Kräv en kran som aldrig spricker

Discofix® C tål effekterna av läkemedel och de spänningskrafter som uppstår vid hantering

Denna unikt konstruerade trevägskran upprätthåller läckagefria anslutningar oavsett vilka läkemedel som används och trots frekvent hantering.

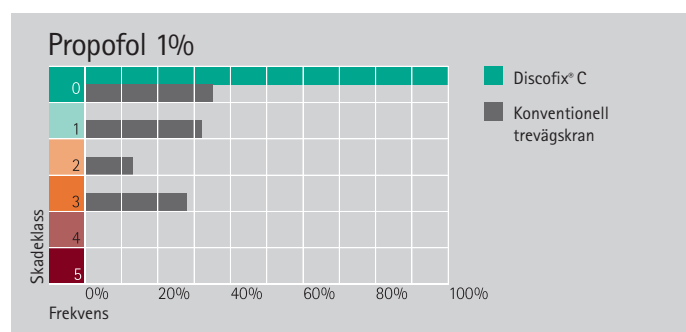
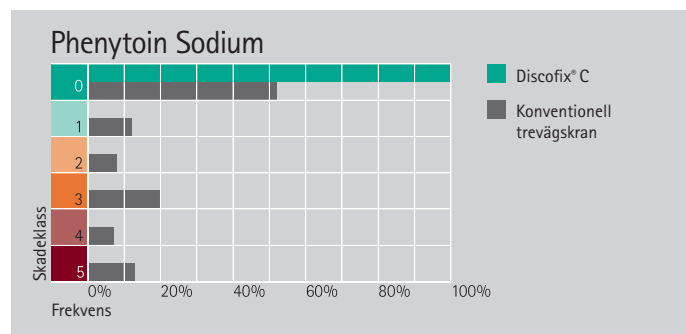
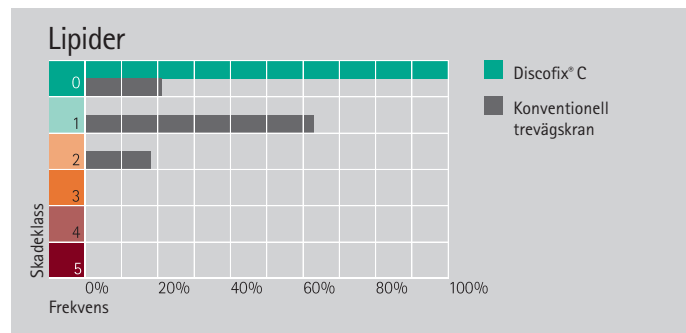
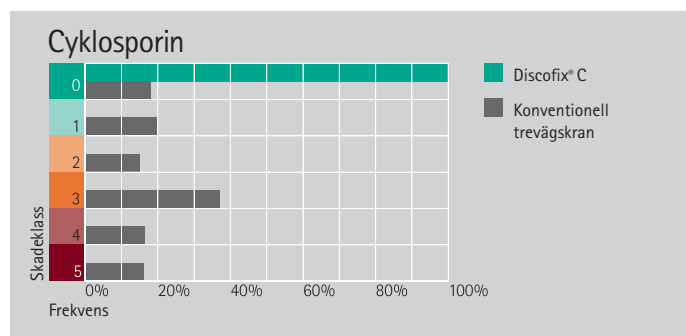
Med Discofix® C slipper du risken för plötslig sprickbildning och de faror som detta kan medföra, till exempel kontamination och luftemboli, i ditt dagliga arbete.

Discofix® C – jämförande test med referenskrantar

De enastående egenskaperna hos denna nya generation av kranar har testats av fristående institut och verifierats av sjukvårdspersonal.

Alla studier visade att Discofix® C inte påverkas av de mest potenta läkemedels-substanser ens under långvarig användning.

*Lösningssmedlet i infusionsberedningar av phenytoin sodium kan mycket snabbt angripa kranar av plast (till exempel polykarbonat).**



Skadeklasser:


Klass 0:
Ingen skada



Klass 1:
Liten spricka



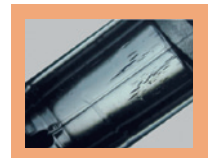Klass 2:
Mycket sprickbildning




Klass 3:
Invändiga sprickor



Klass 4:
Penetrerande sprickor



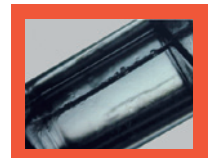Klass 5:
Katastrofala sprickor



Förlita dig på Discifix® C

Säkerhetsfunktioner

- Roterande luer-lockfattning medger lätt åtkomst vid injektion och aspiration.
- Taktill respons vid varje 45° vridning talar om när kranen står i rätt läge.
- Tål skadliga effekter av läkemedel.
- Läckagesäker anslutning även under långvarig användning.
- Hindrar läckage, kontamination och luftemboli.

Detaljerad information för sjukvårdspersonal





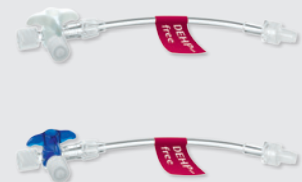











Riskminimering vid infusionsbehandling tas upp i broschyrerna "Chemical Contamination" och "Air Embolism".



Denna nya generation av trevägskranar håller takten med den medicinska utvecklingen

Discifix® C kombinerar ett revolutionerande material med B. Brauns mer än 20 års erfarenheter. Dess enastående egenskaper gör den unikt tålig mot sprickbildning och användarvänlig. De risker och de ständiga kontroller som en gång var associerade med konventionella trevägskranar är nu ett minne blott. Gå vidare mot en kompromisslöst hög nivå av säkerhet och användarvänlighet med Discifix® C.

Discofix® C – Bestäm dig för det bästa

Produkttyp	Färg	Roterande luer-lock	Filter	Proximal kran	Slang (cm)	Slang DEHP-fri	Avd förpackning	Artikelnummer	
Trevägskranar		■	•				100	16494C	
		□	•				100	16495C	
		■	•				100	16496C	
		■	•				100	16497C	
		■	•			10 cm	•	50	16500C
		□	•			10 cm	•	50	16501C
		■	•			25 cm	•	50	16520C
		■	•			50 cm	•	50	16540C
■		•			75 cm	•	50	16551C	
■		•			100 cm	•	50	16560C	
3-kranblock		■ ■ ■	•				50	16600C	
		■ ■ ■	•				50	16605C	
		■ ■ ■	•	•	180 cm	•	50	16611C	
		■ ■ ■	•	•	150 cm	•	50	16610C	
		■ ■ ■	•		150 cm	•	50	16615C	
5-kranblock		■ ■ ■ ■ ■	•				40	16608C	
		■ ■ ■ ■ ■	•				40	16609C	
		■ ■ ■ ■ ■	•		150 cm	•	40	16612C	
		■ ■ ■ ■ ■	•	•	150 cm	•	40	16613C	
		■ ■ ■ ■ ■	•	•	180 cm	•	40	16614C	
Discofix® hållare							1	4086007	