


VBM CUFF CONTROLLER

Automatisk cuffkontroll för trachealtuber med högvolym, lågtryckscuffar.

- Möjliggör tätning mellan tub och trachea med minsta möjliga tryck för att minska risken för tryck och icke-miskador på mucosan
- Inställt tryck bibehålles automatiskt
- Kompenserar för tryckfall > 1cmH2O för att minska risken för aspiration
- Tryckökning på grund av diffusion kompenseras automatiskt till inställt tryck
- Alarmsystem varnar för läckage eller isärkoppling
- Auto-Set funktion som automatiskt sätter trycket till 25 cmH2O
- Touchknappar för tryckinställning
- Stor lättläst LCD-skärm
- Batteriback-up
- Välj mellan cmH2O och mmHg
- Universalklove för montering på standardskena

www.tillquist.se

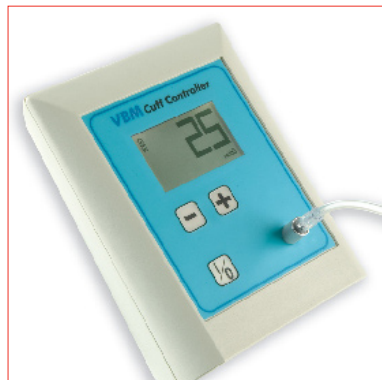

Huvudkontor
Box 8064, 163 08 Spånga
Besök: Fagerstag, 3
Lev: Fagerstag, 3B, 163 53 Spånga
Fax 08-479 39 99

Filialkontor & produktion
Renvägen 1, 352 45 Växjö
Fax 0470-482 92

Telefon: 08-479 39 00
e-Mail: info@tillquist.se

Cuff Controller
med batteri, universalklove
& 100 cm anslutningsslang

Ref.nr
55-13-500V

Tekniska data:
Elförsörjning: 90-250V
Tryckområde: 0-99 cmH2O (0-73mmHg)


Anslutningsslang 100cm
Anslutningsslang 200cm

54-05-111V
61-95-200V

Mått: H 150mm, B120mm, D 60mm
Vikt: 0,4kg

VBM CUFF TRYCKMÄTARE

**För trycksättning och tryckkontroll
av trachealtuber med högvolym,
lågtryckscuffar**

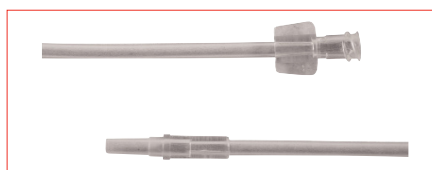

Anslutningsslang

Med Luer Lockkoppling hane och hona

Längd 100 cm Ref.nr 54-05-111V
Längd 200 cm Ref.nr 61-95-200V

Längd 100 cm Ref.nr 54-05-112V Luer

Sensitive

50mm Ø
Utsläppsventil möjliggör
finjustering av trycket.

Ref.nr 54-03-000V

Sensitive med krok

50mm Ø
Utsläppsventil möjliggör
finjustering av trycket.

Ref.nr 54-03-001V

Tillval Vakuumentil

Möjliggör tömning av
cuffen genom samman-
pressning av cuffbollen.

Vid beställning lägg till
VAC efter ref.nr.



VBM Medizintechnik GmbH
Einsteinstrasse 1
DE-72172 Sulz a.N.Germany
Tel.: +49 74 54 / 95 96 10
Fax: +49 74 54 / 95 96 33
info@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de

Distribueras i Sverige av

SUNNEX TILLQUIST AB: