

Semi-permeabelfilm<sup>1</sup>

Maskeringslager

Hyper-absorber

Hydrocellulärt skum

Vidhäftande silikon



 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**   
Life

# ALLEVYN® Life ett hydrocellulärt skumförband uppbyggt av flera lager, högabsorberande med en isolerande kärna samt ett maskerande skikt, som har utvecklats för människor och deras vardagliga liv.



- Unik form med en bred kant för säkrare fixering, för att anpassas till kroppens konturer, och som tillåter patienten att duscha<sup>2-4</sup>
- Ett maskerande lager gör att genombrott av sårvätska syns minimalt, (*in-vitro*)<sup>5</sup>, så att patienten kan känna sig trygg och säker på att förbandet inte ska väcka negativ uppmärksamhet
- Utmärkt förmåga att hålla kvar vätska även under tryck (*in-vitro*)<sup>6</sup>
- Ger patienten ett säkert skydd mot läckage (*in-vitro*)<sup>6</sup>
- Har vid tester (*in-vitro*) visat sig hämma lukt (*in-vitro*)<sup>7</sup>
- ALLEVYN Life är uppbyggt med flera lager som fungerar dämpande och hjälper till att fördela trycket (*in-vitro*)<sup>8</sup>
- Ett silikonkontaktlager minskar risken för smärta och obehag när förbandet tas bort<sup>9</sup> och gör samtidigt att det kan lyftas och sättas tillbaka flera gånger<sup>10</sup>
- Praktisk bytesindikator förhindrar onödiga förbandsbyten.

## Indikationer

Indicerad för behandling av sekundärläkande yttliga, granulerande sår, svårärläta och akuta vätskande sår, full- och delhudsskador som trycksår, bensår, fotsår hos diabetiker, infekterade sår, maligna sår, operationssår, första och andra gradens brännskador, tagställen, hudavskrapningar och illaluktande sår. ALLEVYN Life kan användas på infekterade sår. När ALLEVYN Life används på infekterade sår ska såret behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer.

## Applicering

Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande hårväxt för att få bättre vidhäftning. Ta bort ett av skyddspapperen från ALLEVYN Life och fäst den självhäftande sidan av förbandet på huden. Släta ut förbandet över såret så att inga veck uppstår. Ta bort resterande skyddspapper och stryk med handen över förbandet så att det sitter jämnt och slätt över hela såret utan att vara sträckt. Endast sår dynan får ligga an mot sårytan och ska täcka hela såret. ALLEVYN Life kan användas som förband på svårbandagerade områden som hälar och armbågar. De rundade hörnflikarna kan överlappa varandra när förbandet appliceras så att inga veck uppstår på själva förbandet eller så att det sträcks.

I början av sårbehandlingen ska förbandet kontrolleras ofta. Om ALLEVYN Life används på infekterade sår ska infektionen undersökas och behandlas enligt lokala kliniska rutiner. Förbandet kan sitta kvar i upp till sju dagar utom i sacrum där förbandet måste bytas inom högst fem dagar, beroende på sårets och den omgivande hudens tillstånd, eller tills sårvätska täcker mer än hälften av den absorberande sår dynans ytterkant.

När ALLEVYN Life appliceras i sacrumområdet, där det är en ökad risk för infektion, är det viktigt att kontrollera att förbandet sitter på plats. Ovanstående riktlinjer är enbart avsedda som vägledning och beslut om förbandsbyte ska fattas efter klinisk bedömning enligt lokala kliniska rutiner.

## Beställningsinformation

Artikel nr.	Storlek	Antal/ fp
66801067	10.3cm x 10.3cm (93cm <sup>2</sup> )	10
66801068	12.9cm x 12.9cm (146cm <sup>2</sup> )	10
66801069	15.4cm x 15.4cm (211cm <sup>2</sup> )	10
66801070	21cm x 21cm (392cm <sup>2</sup> )	10
66801304	Heel 25cm x 25.2cm	5
66801306	Sacrum 17.2cm x 17.5cm (235cm <sup>2</sup> )	10
66801307	Sacrum 21.6cm x 23cm (386cm <sup>2</sup> )	10

## ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management  
Smith & Nephew AB  
Kråketorsgatan 20  
431 22 Mölndal  
Sverige

www.smith-nephew.com

®Varumärke från Smith & Nephew  
™All trademarks acknowledged  
© Smith & Nephew januari 2014  
14-01866-SE



T +46 (0) 31 746 58 00  
F +46 (0) 31 87 05 31

## Försigtighetsåtgärder

Använd inte ALLEVYN Life tillsammans med oxiderande medel som hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel kan bryta ned det absorberande polyuretanut i förbandet.

Om rodnad eller överkänslighetsreaktion uppstår ska behandlingen avbrytas.


Klipp inte i förbandet för då kan ämnen och material inuti förbandet kontaminera såret vilket riskerar att förlänga läkningstiden.

ALLEVYN Life får inte användas som den enda behandlingen i syfte att skapa tryckavlastning, utan ska alltid användas i kombination med andra tryckavlastande hjälpmedel. ALLEVYN Life är enbart för engångsbruk. Om det används på mer än en patient finns risk för korskontamination eller infektion. Om förpackningen öppnas påverkas steriliteten, och därför får ett oanvänt förband inte sparas till ett senare tillfälle om förpackningen har brutits. Filmen på ALLEVYN Life Heel är vattentät men försiktighet bör iaktas om man bär den på hälen då förbandet ej bör doppas ner i vatten.

## Borttagning av förband

För att ta bort ALLEVYN Life lyfter du en av häftkantens flikar och drar försiktigt tills hela förbandet har avlägsnats från såret.

Vid sakrala sår ska förbandet dras från toppen i riktning mot anus för att minimera risken för kontaminering.

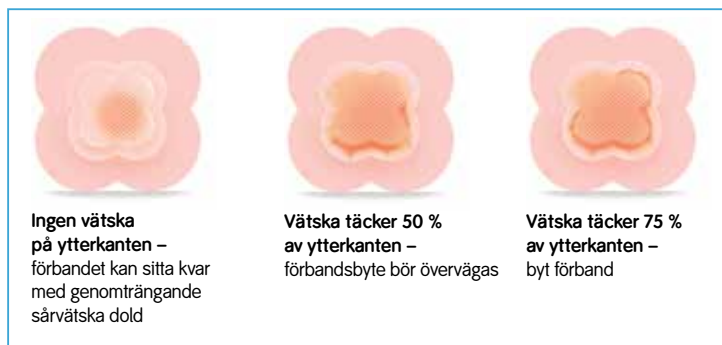

Ovanstående riktlinjer är enbart avsedda som vägledning och beslut om förbandsbyte ska fattas efter klinisk bedömning. Även lokala kliniska rutiner ska beaktas.

## Referenser

1. Data on File Report DS/12/157/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Physical properties of ALLEVYN Life.
2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex™ Border.
3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain™ Silicone.
4. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
5. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
6. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border.
7. Data on File Report DS/12/127/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Odour reducing properties of ALLEVYN Life.
8. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone.
9. Rossington A *et al.*, Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No 4.
10. Stephen-Haynes *et al.*, An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.