



Klinion L-Mesitran

Klinion L-Mesitran

Serien innehåller 7 olika produktvarianter, som täcker alla stadier av sårvård för infekterade / koloniserade sår. Kan användas vid behandling av akuta / kroniska sår fungating - djupa och ytliga sår, mindre brännskador (1: a-2: a graden).

L-Mesitran är effektivt mot ett antal patogena bakterier och svampar, såsom stafylokokker, pseudomonas, E. coli, streptokocker och antibiotikaresistenta bakterier MRSA och VRE. L-Mesitran är också effektivt mot Candida albicans.

Alla produkter måste lagras vid rumstemperatur.

Hållbarhet efter öppnandet: 8 veckor.

Alla produkter i L-Mesitranserien är CE-märkta, FDA (US Environmental Protection Agency) och TGA (Australian Health Authority).

Klinion L-Mesitran honungsprodukter får inte användas av personer med känd allergi mot honung.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Förp.
10012968	Hydrogelfilm m/border, steril	10 x 10 cm	5
10012967	Hydrogelfilm, steril	10 x 10 cm	5
10012969	Nät	10 x 10 cm	5
10016373	Tulle, salvkompress	10 x 10 cm	10
10012593	Sårgel med honung, tub, steril	15 gr	1
10012592	Sårsalva med honung, tub, steril	20 gr	1

vänd →

Leverantör

KLINION

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com

2015-11

KLINION L-MESITRAN SÅRSALVA

Steriliserad salva med 48% honung. Innehåller aloe vera, Zinkoxid, solrosolja, Medilan (högrenat lanolin), fiskleverolja och vitamin A, C och E.

- Omläggning efter 1-2 dagar
- Sårsalvan stryks på en kompress eller ett L-Mesitran nät och läggs om av ett ytterförband
- Lukthämmande effekt
- Beroende av användningsområde kan sårsalvan variera i färg
- Tub 20 gr.



KLINION L-MESITRAN SÅRGEL

Steriliserad sårgel med 40% honung. Medilan innehåller vitamin C och E.


- Omläggning efter 1-2 dagar
- Tunnare än salva
- Sårgelen stryks på en kompress eller ett L-Mesitran nät och läggs om av ett ytterförband
- Lukthämmande effekt
- Beroende av användningsområde kan sårsalvan variera i färg
- Tub 15 och 50 gr.



KLINION L-MESITRAN HYDRO OCH HYDRO BORDER

Steril, semipermeabel, transparent hydrogelfilm med eller utan border, honungsinnehåll 30%. Filmen är framställt av acrylpolymer, täckt av en semipermeabel PU film.

- Omläggning efter 1-5 dagar
- Appliceras direkt på såret
- Lukthämmande effekt
- Hydrogelfilm 10 x 10 cm, hydrogelfilm med border 10 x 10 cm

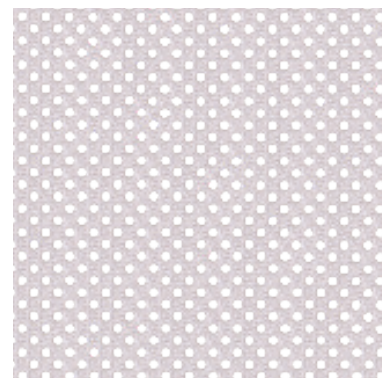

KLINION L-MESITRAN NÄT

Steril, vävd polyester med tillsatt hydrogel - innehåller 30% honung.

- Omläggning efter 3-5 dagar
- Fastnar inte i sårbedden tack vare hydrogelbeläggningen
- Kräver ytterförband
- För användning med L-Mesitran salva eller gel
- Hydrogelnät 10 x 10 cm



KLINION L-MESITRAN SALVKOMPRESS (TULLE)

Steril salvkompres med innehåll av 40% honung. Sårkontaktlagret är gjort av PE.

- Omläggning efter 3-5 dagar
- Fastnar inte i sårbedden
- Kräver ytterförband
- För användning med L-Mesitran salva eller gel
- Salvkompres 10 x 10 cm

Leverantör

KLINION[®]

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 08-88 03 60, www.mediq.se, marknad@mediq.com