

SMART NEGATIVE PRESSURE™ THERAPY



SNAP™ Therapy

SNAP™ Therapy system

Ultraportabelt NPWT system med canister. Kombinerar enkelheten hos avancerade sårforband med undertrycksbehandling.

SNAP™ är tyst och hindrar inte dagliga aktiviteter¹. Enheten är diskret och har lättviktig design i fickformat som kan döljas under kläderna.

Beställningsinformation

vänd →

Artikelnummer	Beskrivning	Tryck	Kapacitet	Förp.
SNPA125-A	Snap™ Therapy enhet med 60 ml canister	-125 mmHG	60 ml	1
SNPA125P-A	Snap™ Therapy enhet med 150 ml canister	-125 mmHG	150 ml	1
Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Kontaktyta	Förp.
SKTF10X10-A	Snap™ avancerad förbandssats	10 x 10 cm	skum	1
SKTF15X15-A	Snap™ avancerad förbandssats	15 x 15 cm	skum	1
BKTF14X11S-A	Snap™ Bridge förbandssats med SNAP™ SecurRing™,hydrokolloid	14 x 11 cm	skum	1
SRNG10-A	Snap™ SecurRing™,hydrokolloid	5 cm Ø		10
STPAS-A	Snap™ Therapy, band	46 cm (liten)		1
STPAM-A	Snap™ Therapy, band	53 cm (medium)		1
STPAL-A	Snap™ Therapy, band	61 cm (stor)		1

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-07

Designat för att förenkla avancerad sårbehandling

- Lätt att använda, har en applikations tid på under 10 minuter¹
- Sluter snabbt och enkelt till på ojämna hudytor och besvärliga kroppskonturer
- NPWT behandling med 125 mmHg, skumförband och canister.

Ökad livskvalitet för patienterna¹

- Liten, tyst, diskret och lättviktig så att den enkelt kan döljas under kläderna
- Minimalt hinder för allmänna aktiviteter, sömn och socialt umgänge
- Hindrar inte patientens rörlighet, medför att patienterna kan förbli aktiva under behandlingen
- För fullständig produkt- och säkerhetsinformation hänvisas till bruksanvisningen som följer med produkten.

Förband




Rengör såret och applicera det blå skumförbandet.




Placera hydrokolloidförbandet över såret och förslut.

Enheten

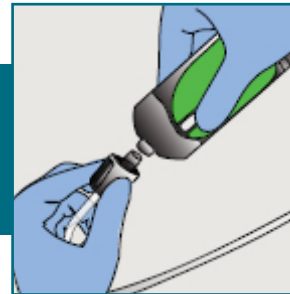


Anslut slangen från hydrokolloidförbandet till SNAP™-enheten.

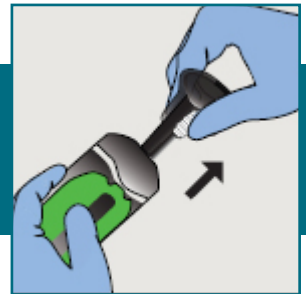

Ta bort aktiveringsnyckeln från enheten för att initiera behandlingen med negativt tryck.

Behandling

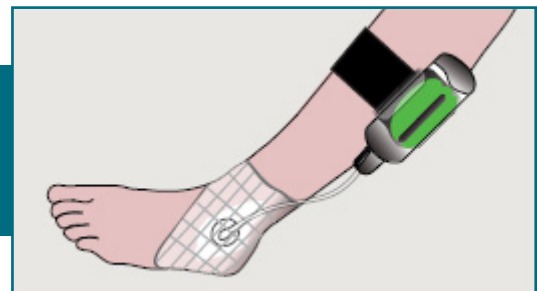

REFERENSER

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. Wound Rep Reg. 2012; 20(3):332-341

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com