



Kliniderm® sårkontaktlager av silikon

Kliniderm sårkontaktlager av silikon har en mjuk porös struktur som låter vätskan passera till ett yttre absorberande förband. Då silikonlagret helt saknar absorptionsförmåga används det alltid tillsammans med ett sekundärt förband som exempelvis Klinion Exsupad eller Kliniderm superabsorberande förband för kraftigt vätskande sår.

Den porösa strukturen minimerar risken för att sår-
vätskor läcker ut i horisontell riktning till sårkanterna, i stället absorberas de omedelbart i vertikal riktning ut till det sekundära förbandet och därigenom minimeras risken för maceration av sårkanterna.

Ett silikonlager på ena sidan gör att förbandet är enkelt att använda och hindrar det yttre förbandet från att fästa i sårkontaktlagret vid förbandsbyte vilket gör det möjligt att byta det sekundära förbandet utan att störa sår-läkningen eller orsaka smärta. Då förbandet är mycket genomskinligt är det möjligt att inspektera såret utan att ta bort sårkontaktlagret.

Kliniderm silikonlager kan sitta kvar i upp till 14 dagar.

Det avancerade häftämnet i silikon fastnar inte på våta vävnader vilket minimerar smärta och skador vid borttagning.

Denna produkt är avsedd för en lång rad vätskande sår som diabetesfotsår, trycksår, venösa och arteriella bensår, första och andra gradens brännskador, kirurgiska sår och traumatiska sår.

Det kan även användas som ett sårskyddande lager vid behandling med negativt tryck.

Funktioner och fördelar

- Störningsfri läkning och minskad smärta vid byte av absorberande förband.
- Minimal maceration av sårkanter.
- Hög genomskinlighet gör det möjligt att inspektera såret utan att ta bort kontaktlagret.
- Silikon på ena sidan gör det enkelt att använda och förhindrar att det absorberande förbandet fastnar i sårkontaktlagret.
- Kostnadseffektiv lösning.

Leverantör

KLINION®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

Avsedd användning

Denna produkt är avsedd för en lång rad vätskande sår som exempelvis diabetesfotsår, trycksår, venösa och arteriella bensår, första och andra gradens brännskador, kirurgiska sår och traumatiska sår.


Komponenter/material

Väv av silikonfilm belagd med silikongel.

PVC/ftalater	Nej
Latex	Nej
CE-klassificering	2b
Steril produkt	EO-steriliserad
Specialmärkning	Ingen uppgift
Förvaring öppnad	2 år
Förvaring öppnad	Ingen uppgift
Kassering av produkten	Följ lokala föreskrifter för farligt avfall
Kassering av inre förpackning	Följ lokala föreskrifter för förpackningsmaterial
Kassering av yttre förpackning	Följ lokala föreskrifter för förpackningsmaterial.

Beställningsinformation

Art.nr.	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
10016133	5 x 7,5 cm	10	700
10016134	7,5 x 10 cm	10	400
10016518	10 x 18 cm	10	700
10016519	20 x 30 cm	5	150
10016520	17 x 25 cm	5	200

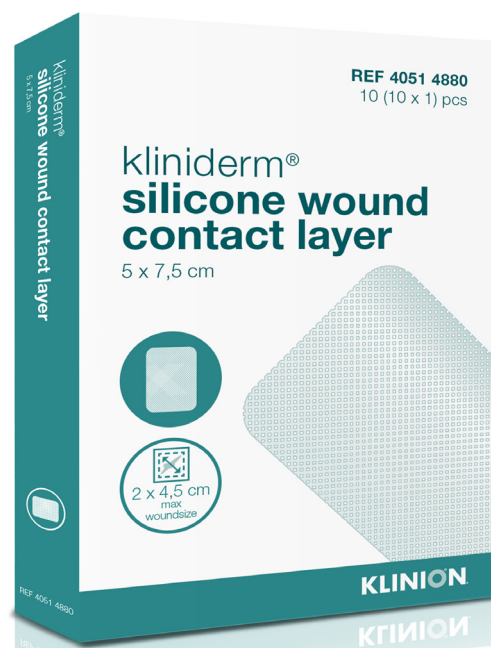

Leverantör

KLINION®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2018-05