



# LMA Protector Airway

## Protector - PVC-fri

Protector är en andra generationens larynxmask utrustad med två sugkanaler, en för möjligheten att använda en sond för att kunna tömma magsäcken på maginnehåll, den andra för att kunna tömma den integrerade reservoaren.

Protector har en integrerad cufftrycksindikator, vilket gör det möjligt att se trycket i kuffen utan att använda en cufftrycksmätare. Det finns även möjlighet att kunna intubera genom larynxmasken med hjälp av ett fiberskop. Tuben har ett effektivt First- och Second Seal, fixeringsplatta för möjlighet att kunna fästa larynx-masken samt integrerat bitblock i skaftet. Tillverkad av silikon och polypropylen. Största tub som kan användas är 7,0 mm.

MR-kompatibel.  
Steril, för engångsbruk. PVC-fri.  
Avd.förp. 10 st.

## First Seal

För att säkerställa luftvägarna vid förhöjt tryck i thorax, så som vid övervikt eller ökat lungtryck. Tätar till i esophagus.

## Second Seal

Genom sin unika tätning minskar risken att luft kommer ner i magsäcken, samt att maginnehåll kommer upp och kommer över i luftvägarna.

Leverantör


**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

# LMA Protector Airway

## med integrerad cufftrycksindikator

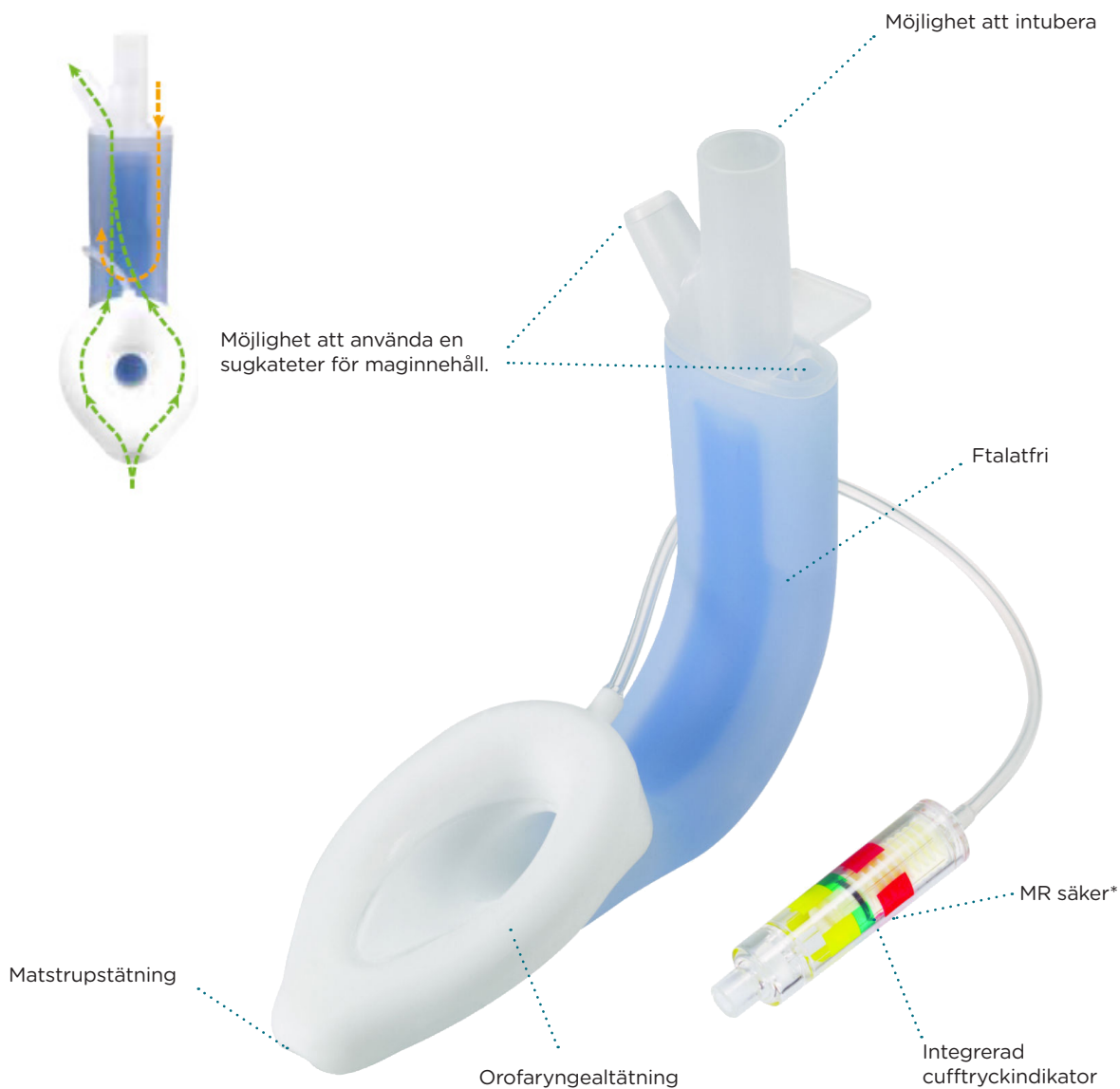

Art.nr. med cufftrycksindikator	Mediq Art.nr.	Storlek	Patientvikt	Max cuffvolym (luft)**	Största ETT tub mm	Största lumen OG tub	Avd.förp.
192030	10016980	3	30-50 kg	60 cm H <sub>2</sub> O	6,5	14 Fr	10
192040	10016981	4	50-70 kg	60 cm H <sub>2</sub> O	7,0	16 Fr	10
192050	10016982	5	70-100 kg	60 cm H <sub>2</sub> O	7,0	16 Fr	10

\* LMA Protector Airway med integrerad cufftrycksindikator teknologi

\*\* Dessa är de maximala volymer som aldrig bör överskridas. Det rekommenderas att cufftrycket blåses till maximalt 60 cm H<sub>2</sub>O.

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com