

Terumo® Surshield® Versatus™

Perifer venkateter med stickskydd



Surshield® sharps protection.
Our point? Your safety!

- **Passiv aktivering** av skyddssystemet
- **Fullständig och omedelbar inkapsling** av kanylspetsen vid borttagandet
- **Ingen exponering** för kontaminerade kanylspetsar
- **Permanent skydd** efter användning
- **Oförändrad införingsteknik**




Terumo's Surshield® en integrerad stickskyddsfunktion¹ på Terumos perifera venkatetrar, innebär ett viktigt steg mot minskade risker² för sjukhuspersonal.

Vårdpersonalen kommer att uppskatta det lättanvända skyddet på Surshield® Versatus™ perifera venkateter. Versatus™ perifera venkateter med Surshield® innebär en ny säkerhetsstandard när det gäller skydd mot stickskador. Den bekvämlighet och effektivitet som gör Terumos produkter vida uppskattade bland både medicinsk personal och patienter, har bevarats till fullo.

Terumo® Surshield® Versatus™


Perifer venkateter av polyuretan med injektionsport

Den röntgentäta katetern är tillverkad av polyuretan (PUR) som är styv vid rumstemperatur och blir mjukare i kroppstemperatur. Patientens bekvämlighet ökar, då katetern är knickningsresistent och biokompatibel. Injektionsporten på den perifera venkatetern medger intermittenta injektioner med läkemedel under infusionen. Tack vare dess centrala position minskar risken för skador på venen och patienten under injektionen.

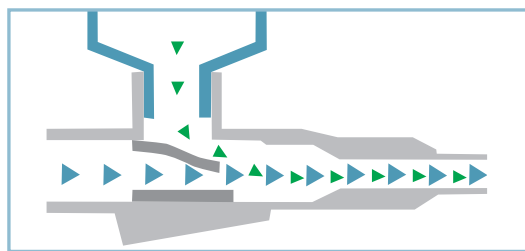

Backflöde

Backflödeskammaren är transparent för att underlätta snabb upptäckt av backflöde. En ventilationspropp med hydrofobt filter tillåter luftpassage och garanterar förslutningen för att undvika alla risker för kontamination. Luer Lock-proppen gör det möjligt att stänga katetern när den inre kanylen har dragits ut.

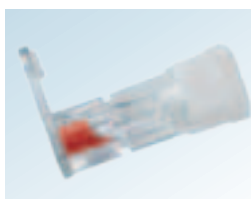

Konformad kateterspets

Den perfekt avsmalnande kateterspetsen gör det möjligt för katetern att tränga in i venen med minimal venskada, och gör den lättplacerad. Distansen kanyl/kateterspets minskar risken för genomstick.



Surshield® Versatus™ – perifera venkatetrar med vingar och portar

Produktkod	Färgkod	Kateterns externa diameter		Kateterns interna diameter		Kateterns längd	Flödes hastighet	Obturator
		Gauge	mm	mm	mm			
SR+DS2419PX	Gul	24	0,74	0,55	19	29	SO+DM2419P	
SR+DS2225PX	Blå	22	0,90	0,65	25	42	SO+DM2225P	
SR+DS2032PX	Rosa	20	1,00	0,75	32	59	SO+DM2032P	
SR+DS1832PX	Grön	18	1,30	0,95	32	103	SO+DM1832P	
SR+DS1845PX	Grön	18	1,30	0,95	45	96	SO+DM1845P	
SR+DS1745PX	Vit	17	1,50	1,15	45	155	SO+DM1745P	
SR+DS1645PX	Grå	16	1,75	1,35	45	225	SO+DM1645P	
SR+DS1445PX	Orange	14	2,00	1,55	45	290	SO+DM1445P	

Antal per förpackning: 50 st

Transportkartong: 200 st

Hållbarhet: 3 år



¹ Eucomed "position paper" - Preventing 'sharps' injury. P5 .3

² Ippolito and Puro: Device Specific Risk of NSI in Italian HCW. Jama 1994 ; 272 : 607-10.

Steriliserad med etylenoxid



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143/145
00142 Roma RM,
Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

**Terumo Europe N.V.
Moscow Representative Office**
JSC Northern Tower
13Fr., 10 Testovskaya Street
Moscow 123317, Russia
Tel.: + 7 495 988 4740
Fax: + 7 495 988 4739

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

European Offices

**Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Terumo Deutschland GmbH

Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

Terumo Sweden AB

Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda,
Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

**Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB**
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo UK Ltd

Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

Addresses subject to change,
please consult our Website.

© Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
HO 87SW-0211-I(02.11)E