

SPRUTA ENTERAL, ENFIT, FLERGÅNGSSPRUTOR, STERIL.



Ingående delar/material

Hylsa:	Polypropylen (PP)
Kolv:	Polypropylen (PP)
O-ring	Silikon

Färg

Transparent
Lila
Svart

Förpackningar

Peelpack
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

Papper/PE/PET
Kartong
Wellpapp

Avfallshantering*

Papper/mjukplast
Kartong
Kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller:

ISO7886-1: 2017 sterila injektionssprutor för engångsbruk - del 1: sprutor för manuell användning. ISO80369-3: 2016 kopplingar med små borrhål för vätskor och gaser i vårdtillämpningar - del 3: kontakter för enterala applikationer. ISO80369-20: 2015 små kontakter för vätskor och gaser i vårdtillämpningar - del 20: vanliga testmetoder.

Art.nr.	Volym	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
EN12	KORK	1	100	4000	TFP
EN12S	KORK AUTO-STAND	1	100	4000	TFP
EN021L	1 ml LDT	1	30	900	TFP
EN023L	3 ml LDT	1	30	900	TFP
EN025L	5 ml LDT	1	30	900	TFP
EN0210	10 ml	1	30	900	TFP
EN0220	20 ml	1	30	600	TFP
EN0260	60 ml	1	30	180	TFP

Indikation:

Administrering av näringslösning/ medicin och/eller genomspolning

Bruksanvisning:





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

Enterala flergångssprutor ska endast användas av en person. De kan diskas och återanvändas upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.



Lagring och hållbarhetstid:

Förvaras på torr och sval plats Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	CE-märkt enl. MDR 2017/745 klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex



R_x Only

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till

**Manufacturer:**

Jiangsu Caina Medical Co., Ltd
No.23 Huanxi Rd,Zhutang Town,jiangyin,
City,Jiangsu
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se


EC-REP:

Shanghai International Holding Corp GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
Germany


Instruktion för rengöring och förvaring.

Läs instruktionen före användning.

Vid tveksamhet gällande hantering, kontakta medicinskt utbildad personal.

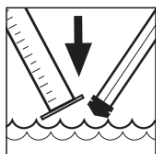

1. Avlägsna kolven från hylsan. Diska delarna i ljummet vatten med mildt diskmedel. Var särskilt noggrann med att avlägsna alla spår av näringslösning eller medicin från hörnor och trånga utrymmen.

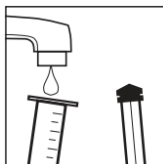


2. Skölj noggrant under kallt rinnande vatten för att avlägsna allt diskmedel. Inspektera delarna för att säkerställa att alla rester av näringslösning eller medicin är borta.

3. Skaka av överflödigt vatten och låt delarna lufttorka. Sätt inte ihop sprutan om den inte är helt torr. Förvara sprutan i en ren behållare med lock.



4. Sprutan kan rengöras upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

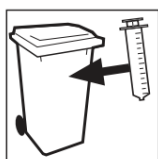

5. Avfallssortering enligt lokala föreskrifter.

Manufacturer:

Jiangsu Caina Medical Co., Ltd
No.23 Huanxi Rd,Zhutang Town,jiangyin,
City,Jiangsu
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Shanghai International Holding Corp GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
Germany